



BRUKSANVISNING

OptiCell SMART

luftmadrasssystem

madrasserie N, R och T



Järven Health Care

Tack till ditt val av OptiCell. Vårt mål är att du ska bli nöjd med madrassen både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din madrass.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

CE-MÄRKNING

OptiCells luftmadrass-system är CE-märkta enligt MDR 2017/74.

Detta innebär att OptiCell AB har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation och försäkran som bevaras i minst tio år.



KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdpersonal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet bränder som uppkommer i vården.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	2
Innehållsförteckning.....	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Allmänt om OptiCell SMART.....	5
Idrifttagande.....	5
Överdraget OptiTex	6
Förväntad livslängd	6
Brandskydd.....	6
Avsedd användning.....	7
Funktioner OptiCell SMART	8
Innan användning	9
Handhavande.....	10
Luftslangarnas koppling	11
Handtest	11
Översikt – Pump OC55	12
Specifikationer.....	13
Skötsel – Inspektion och felsökning	14
Skötsel – Rengöring.....	15
Handtest	16
Återvinning.....	17
Övrig information	18
Symbolförklaring	19
Tillbehör.....	20

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs följande information innan ni använder er luftmadrass!

- Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Säkerställ att madrassen inte blir klämd eller skadad vid förvaring.
- Undvik vassa föremål i närheten av madrassen.
- Undvik mekaniska stötar.
- OptiCell är brandtestad enligt standard SS 876 00 01, EN 597-1 & 2. Det är kundens ansvar att göra en bedömning av brandrisken och därefter använda rätt produkt. Kontakta oss gärna vid frågor.
- För att undvika skador får produkterna inte komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Försäkra er om att ni använder rätt madrassstorlek till aktuell säng samt rätt modell till aktuell patient.
- Anslut produkten till närmaste vägguttag, så att ett så kort stycke av sladden som möjligt ligger på golvet.
- Följ standarderna för elektrisk säkerhet.
- Undersök alltid elektrisk kabel innan användning.
- Skadad eller trasig elkabel får ej användas.

PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS AV

- Patienter med instabila ryggradsfrakturer.
- Vid andra instabila frakturer krävs en medicinsk undersökning för att avgöra om det är lämpligt att använda produkten.
- Patienter med avvikande anatomier.
- Patienter som lider av cervikal traktion eller bentraktion.

ALLMÄNT OM OPTICELL SMART

OptiCell SMART har utformats som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande trycksårsvård upp till och med sårkategori 4 beroende på val av madrass.

Madrasserna finns i olika modeller, se sammanställning under Avsedd användning sidan 7.

Madrasserna är avsedda att användas med ett lakan mellan patientens hud och madrassens yta.

OptiCell Smart kan i följande miljöer, definerade i standard IEC 60601-2-52

- Användningsmiljö 1 (*akutvård*).
- Användningsmiljö 2 (*korttidsvård på sjukhus eller andra sjukvårdsinrättningar*).
- Användningsmiljö 3 (*långtidsvård på sjukvårdsinrättningar*).
- Användningsmiljö 4 (*vård i hemmiljö*).
- Användningsmiljö 5 (*poliklinikpatienter eller öppenvård*).

I enlighet med NPUAP/EPUAP-direktiven rekommenderas att patientens tillstånd kontrolleras regelbundet.

IDRIFTTAGANDE

Denna bruksanvisning innehåller information för allmän användning, underhåll och förbättrad säkerhet. Det är viktigt att läsa igenom denna bruksanvisning före användning av produkten.

Vårdgivare ska ges tillgång till bruksanvisningen och även informeras om de risker som kan uppstå vid användning av elektrisk utrustning. Utbildning angående produkten kan tillhandahållas på begäran.

Innan produkten används för första gången eller när den tas fram från förvaringsplatsen:

- Kontrollera elsystemets skick och överensstämmelse med gällande säkerhetsstandarder.
- Anslut produkten till nätströmskällan
- Väggtaget ska vara tillgängligt så att madrassen kan kopplas bort vid behov.
- Säkerställ att samtliga av produktens funktioner är i gott driftsskick.
- Se till att produkten och vårdmiljön är i gott hygieniskt tillstånd.
- Kontrollera att produkten placeras på ett säkert sätt i driftsmiljön.
- Efter att madrassen fyllts med luft och patienten placerats på madrassen bör ett handtest genomföras (se sid 11)

Om madrassen används med andra medicintekniska produkter är det användarens ansvar att säkerhets- och överensstämmelsekrav uppfylls.

ÖVERDRAGET OPTITEX®

OptiTex® är ett bi-elastiskt hygienskikt som genom sin uppbyggnad bidrar till madrassens tryckavlastande egenskaper.

OptiTex™ överdraget har integrerad, vattentät kabelhållare som minskar risken för bakteriespridning, håller elsladden ur vägen och även skyddar luftslangarna.

Överdraget är tillverkat av ett PU-material på både över- och undersida. Hela överdraget (både över- och undersida) kan rengöras med desinfektionsmedel, maskintvättas (max 95° C) samt torktumlas.

Celler och slangar kan enkelt plockas ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70° C) eller rengöras med med desinfektionsmedel.

Low Air Loss funktionen tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta tillsammans med det elastiska ytskiktet hjälper till att minska risken för hudmaceration och andra komplikationer för brukaren.

Droppskyddat vattentätt blixtlås på fyra sidor. Alla sömmar är svetsade för att minska risken för genomträngning av vätskor.

Undersida med antiglid-funktion och fyra fästband.

Överdraget är utrustat med fyra stycken handtag för förflyttning.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Under normala förhållanden och normal skötsel är förväntad livslängd 5 år för våra OptiCell system.

BRANDSKYDD

OptiCell 4 PRO V2 lufttrycksmadrass är testad och godkänd enligt SS 876 00 01, EN 597-1 och EN 597-2.

AVSEDD ANVÄNDNING

OptiCell Smart är ett alternerande och tryckavlastande luftmadrass-system som har utformats som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande trycksårsvård upp till och med kategori 4.

OptiCell SMART – madrasskonfiguration

Kombinationen pump och madrass ger systemet en unik uppsättning funktioner. Målet är att minska inlärningskurvan för användandet av system och i slutändan ge personalen ett ökat självförtroende.

Se sammanställning nedan för information om respektive madrass och dess egenskaper.

MADRASS-SERIE N NYLON-CELLER	MADRASS- TJOCKLEK	MAX- BELASTNING	CELL-TYP*	MADRASS- TYP**
SMART N5	13 cm	200 kg	Enkel-cell	Bädd
SMART N7	18 cm	230 kg	Enkel-cell	Kombi
SMART N8	20 cm	250 kg	Cell-on-Cell	Ersättning

MADRASS-SERIE T TPU-CELLER	MADRASS- TJOCKLEK	MAX- BELASTNING	CELL-TYP*	MADRASS- TYP**
SMART T5	13 cm	200 kg	Enkel-cell	Bädd
SMART T7	18 cm	230 kg	Enkel-cell	Kombi

MADRASS-SERIE N TPU-CELLER	MADRASS- TJOCKLEK	MAX- BELASTNING	CELL-TYP*	MADRASS- TYP**
SMART R6	15 cm	210 kg	Cell-on-Cell	Ersättning
SMART R7	18 cm	230 kg	Cell-on-Cell	Ersättning
SMART R8	20 cm	250 kg	Cell-on-Cell	Ersättning
SMART R10	25 cm	350 kg	Cell-on-Cell	Ersättning

* Enkel-cell Madrassen består av flera individuella celler.

Cell-on-Cell Madrassen består av flera individuella celler där varje cell består av två luftfack.

** Bädd Bäddmadrass som ska användas i kombination med en separat skummadrass i botten.


Kombi Madrassen har en inbyggd skumkärna (5 cm) under luftcellerna och placeras direkt på sängbotten.

Ersättning Madrassen består av Cell-on-Cell luftceller och placeras direkt på sängbotten.



ENKELCELL

Cellen består av en växlande luftkammare.

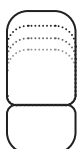

CELL-ON-CELL

Cellen består av två luftkammare där den övre är växlande. Den undre luftkammaren agerar som skydd mot att patienten "ligger igenom".

FUNKTIONER, OPTICELL SMART

OptiCell SMART luftmadrass-system är uppbyggda så att man enkelt, medan en patient på madrassen, kan koppla loss enskilda celler. Madrasserna har tre olika typer av celler med olika funktion.

- **Huvudceller** – Kontinuerligt luftfyllda luftceller som främst används under huvudet.
- **Standardceller** – två-kammarceller som har en del som är kontinuerligt uppblåst och en del med alternerande lufttryck.
- **Ventilationsceller** – fungerar som standardcellerna, men med ventilationshål som blåser ut små mängder luft uppåt in i överdraget. Detta för att skapa en luftcirkulation som hjälper till att hålla översidan på överdraget torrt samt minska risken för skjuv. Genom att sätta in extra ventilerande celler kan en luftigare känsla skapas när brukaren upplever att överdraget känns varmt på ett specifikt område.

Individuella celler kan enkelt kopplas loss genom att:

- Lossa luftslangen från aktuell cell genom att tryck en knapp på luftslangens koppling.
- Knäppa loss de båda tryckknapparna på cellens kortsidor.

LUFTSLANGAR FRÅN PUMPEN.

OptiCell SMART har en koppling med tre slangar från pump till madrass.

En luftslang, mellanslangen (röd), används för att fylla huvudcellerna under huvudet och för att fylla de undre cellkamrarna på övriga celler (Cell-on-Cell). Detta för att alltid garantera att det finns luft i madrassen oavsett hur man ställer pumpen eller om pumpen skulle sluta fungera (*strömavbrott eller liknande*).

Det två andra slangarna ger antingen alternerande eller statiskt tryck till standard- och ventilationscellerna. Se avsnittet "Luftslangarnas koppling" (sid 10) för ytterligare information.

PUMPENS OLIKA ARBETSSÄTT.

Genom att ställa in pumpen kan man både få en statiskt och en alternerande lufttrycks-madrass med olika grader av lufttryck. Se Översikt Pump, sid 15.



INNAN ANVÄNDNING

MOTTAGANDE OCH UPPACKNING

OptiCell SMART levereras hoprullad i kartong. Undvik att använda kniv vid uppackning och hantering på grund av risk för skador på produkten.

Börja med att kontrollera att varan inte är skadad.

Vid eventuell transportskada, se sid 17.

OptiCell SMART luftmadrass-system innehåller

- 1 st pump
- 1 st strömkabel (6 meter) till pump
- 1 st madrass, med luftkablage och CPR-ventil samt överdrag OptiTex™

OptiCell kan placeras ut och användas direkt.



ATT TÄNKA PÅ..

- **Luftpumpen inte ska användas i fuktiga utrymmen**, ej heller lämnas utomhus vid fuktig väderlek. Undvik att hantera pump som utsatts för väta fram tills denna torkat.
- **Var noggrann vid hantering av pump och el/luftslangar.** Luftslangar kan klämmas och skadas av sänggrindar m.m.
- **Madrassens komfort och funktion** ändras beroende på madrassens lufttrycket i relation till brukarens vikt. Tänk på att en lång brukare kan väga lika mycket som en kort men behöva ett annat tryck. Detta måste alltid undersökas noggrant på varje brukare.
- **Den är viktigt att se så att patienten inte "ligger igenom" madrassen.** Om brukaren botten igenom så förlorar madrassen sin funktion. Se sid. 11 för information om Handtestet.
- **Brukaren får inte placeras så att andningsvägarna vänds in mot madrassen.**



Viktigt att inga vassa föremål kommer i kontakt med madrassen.

Undvik att knivar, nyckelknippor eller andra föremål med skärande eller punkterande egenskaper kommer i kontakt med madrassen för att undvika skada på produkten.

FÖRVARING

OptiCell lufttrycks-system förvaras i torra, rumstempererade lokaler.

Vi rekommenderar att madrassen förvaras hoprullad i vår praktiska transport-bag (tillval).

Madrassen bör inte hanteras ovarsamt vid förvaring eftersom den då riskerar att skadas.

Undvik att utsätta madrassen för direkt solljus under längre tid.

HANDHAVANDE

Madrassen kan luftfyllas och användas direkt efter leverans.

Att fylla madrassen tar ca 15 minuter och bör ske utan patient på madrassen.

AUTOMATINSTÄLLNING

När man startar pumpen är den inställd på att automatiskt justera lufttryck utifrån brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Pumpen är förinställda på komfortläge "0" samt 10 minuters växling. Detta gör det enkelt att börja använda madrassen.

Både komfortläge och växlingsintervall kan justeras via pumpens kontrollpanel, (se sid 12).

STATISKT LÄGE

I vissa fall vill man hålla madrassens lufttryck statiskt, t.ex. vid omvårdnadssituationer eller när brukaren störs av ett alternerande tryck. Madrassen ställs enkelt om till statiskt läge via pumpens kontrollpanel. (se sid 12).

NOTERA att Korrekt terapeutisk effekt uppnås vid alternerande läge. Statiskt lufttryck (konstant lågt tryck) bör endast användas när så är nödvändigt.

VID LARM FÖR LÅGTRYCK

Om madrassen får för lite luft tänds lampan "Leaking" och ett ljudlarm startar.

Börja med att trycka på knappen "Mute" (*position H på sida 12*) för att tysta larmet. Kontrollera sedan följande punkter för att hitta orsaken.

- Säkerställ att luftslangarnas kontakt sitter korrekt i pumpen. Kontrollera även kontaktens gummitätningar så att dessa inte saknas, hamnat fel eller är utslitna.
- Säkerställ att det inte är läckage mellan luftcellerna och luftslangarna.
- Säkerställ att CPR-ventilen är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera alla luftceller för läckage. Detta sker enklast när pumpen är inställd på omvårdnadsläge (Se sid 12).

Om inget fel/läckage kan upptäckas ska madrassen bytas ut varefter Järven Health Care kontaktas för konsultation. Kontaktinformation hittar du på bruksanvisningens sista sida.


LUFTSLANGARNAS KOPPLING

Koppla luftslangar till pump


För att koppla eller lossa luftslangarna från pumpen samt för att ta bort skyddslocket på kontaktdonet, tryck in de båda spännena på sidan av kontakten. Detta frigör de hakar som håller kontakten på plats.

För att minimera risken för luftläckage vid koppling, kontrollera:

- Att de två hakarna inte är skadade och har kvar sin spänst.
- Att de svarta o-ringarna på kontaktens tre luftrör inte är saknas, hamnat fel eller är utslitna.
- Att inget skräp kommit blockerar luftrören eller ger dålig tätning.

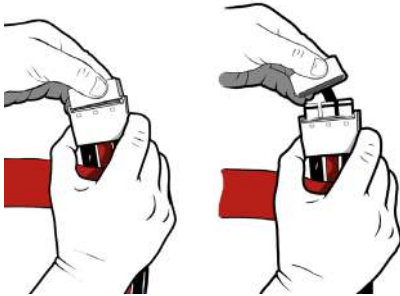


*Luftslangarnas koppling
monteras med en enkel
handmanöver.
Inga specialverktyg krävs.*

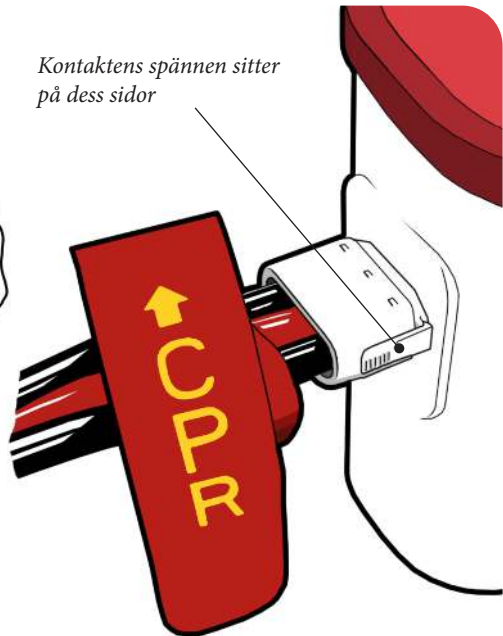

ÖVERSIKT – PUMP OC55

- A** Att fylla madrassen tar normalt ca. 15 minuter. När lampan lyser är madrassen klar.
- B** Dynamiskt läge, välj för att ställa pumpen i dynamiskt (växlande) läge.
- C** Statiskt läge, välj för att ställa pumpen i statiskt läge.
- D** Omvårdnadsläge, ger maximalt statiskt tryck för att underlätta omvårdnadssituationer. Madrassen återgår automatiskt till tidigare inställningar efter 30 minuter.
- E** Knapparna på panelen låsas för att försvåra obehörig justering av pumpens arbets sätt. För att låsa upp panelen, håll in denna knapp i 5 sekunder.
- F** Justera komfortläge, det finns fem komfortlägen att välja mellan. Patientens upplevelse av madrassen påverkas av det komfortläge som väljs.
- G** Välj tidsintervall för växling i minuter.
- H** Alarm Reset, tryck för att tysta eventuella larm. Lampan "☹️" lyser när lufttrycket i madrassen är lågt. Kontrollera ev. läckage. Lampan "⚡" lyser vid eventuellt ström fel.

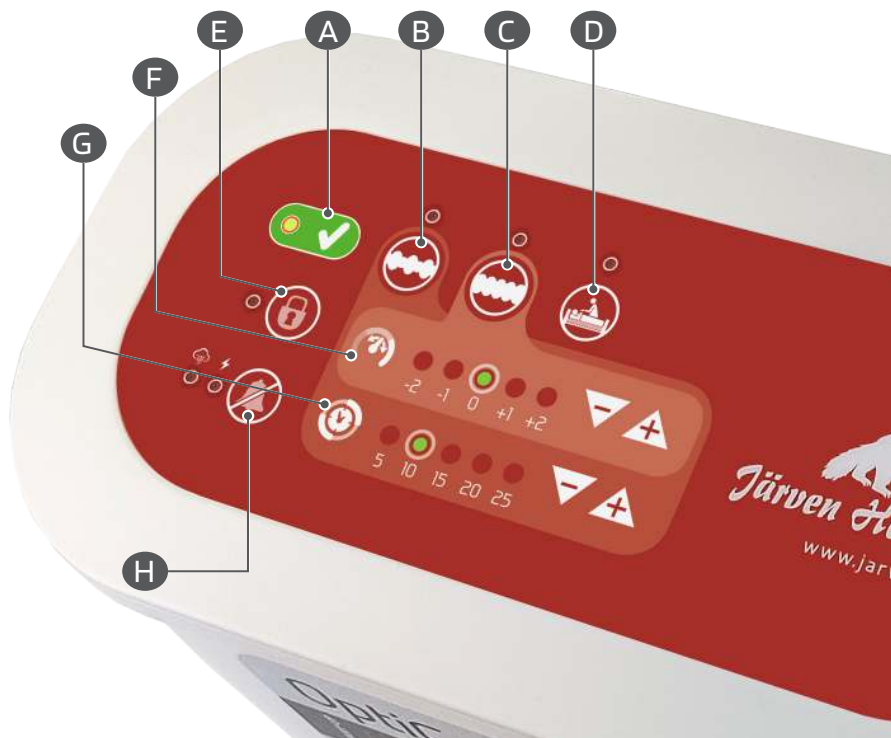

SPECIFIKATIONER

PUMP OC55	SPECIFIKATIONER
Storlek	28,0 x 11,0 x 20,5 cm
Vikt	3,4 kg
Tryckområde	20 ~ 70 mm Hg
Cykeltid	10, 15, 20 eller 30 minuter

SYSTEM	SPECIFIKATIONER
Klassifikation	Klass II; IPXO, No AP/APG; Typ BF**
Tillämpad del	Madrass
Strömspecifikation	AC 220-240 - 50 Hz 1A, 17W
Säkringsspecifikation	250 V, T 1 A
Miljökrav	<p>TEMPERATUR</p> <p>Bruk: 10° ~ 35° C</p> <p>Retention: -15° ~ 50° C</p> <p>Transport: -15° ~ 70° C</p> <p>FUKTIGHET</p> <p>Bruk: 20% ~ 80% utan kondens</p> <p>Retention: 10% ~ 90% utan kondens</p>
Säkerhetsstandard	CE, IP21



SKÖTSEL – INSPEKTION OCH FELSÖKNING

INSPEKTION AV DIN LUFTRYCKSMADRASS

En inspektionsplan för madrassen bör upprättas för att din lufttrycksmadrass ska hålla och fungera så länge som möjligt. Kontakta gärna oss på Järven Health Care så hjälper vi er med detta. Kontaktuppgifter hittar du på bruksanvisningens sista sida.

INSPEKTION AV MADRASS OCH PUMP

- **Kontrollera elsladden och stickkontakten** för att se om det finns skador eller onormalt slitage.
- **Kontrollera överdraget** för att se om det finns skador eller onormalt slitage.
- **Kontrollera att madrassens celler** är korrekt isatta i luftslangarna
- **Starta pumpen och undersök luftströmmen** från pumpen (med luftslangen oinkopplad). Luftströmmen bör alternera mellan övre och undre hålet (av tre) varje växlingstid. Slangen från det mellersta hålet är avstängd.
- **Kontrollera luftslangarna** för att se om det finns skador eller onormalt slitage.
- **Kontrollera luftslangarnas koppling.** Se sid 11.

INSPEKTION AV OPTITEX™ HYGIENÖVERDRAG

Kontrollera regelbundet överdraget för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning. Kontrollera madrassens alla sidor (även undersida).

FELSÖKNING

Pumpen fungerar inte/startar inte

- Kontrollera att elkontakten är ordentlig isatt, slå sedan på pumpens strömbrytare.
- Om strömindikatorn är av så kan det vara problem med uttaget. Testa ett annat eluttag.
- Om strömindikatorn är på men pumpen inte fungerar så ring säljaren

Madrassen fylls inte upp som den ska (ger för lågt tryck).

- Ställ upp trycket till maximum, undersök om luftslangarna är böjda eller om det finns något läckage i någon cell. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.

Dåligt luftflöde

- Ett smutsigt luftfilter kan minska luftflödet. Tvätta luftfiltret med mildt rengöringsmedel för att hålla det rent. Luftfiltret sitter lättåtkomligt på baksidan av pumpen och kan lossas med ett enkelt handgrepp.

SKÖTSEL – RENGÖRING

RENGÖRING AV PUMP

För att rengöra pumpen använd fuktig trasa och mildt rengöringsmedel för pumphus och elsladd.

RENGÖRING AV ÖVERDRAG

Överdraget är tillverkat av ett PU-material på både över- och undersida. Hela överdraget (både över- och undersida) kan, vid behov, enkelt torkas av och rengöras med desinficeringsmedel. Använd alkoholbaserat desinficeringsmedel.

Sjukvårdstextilier som kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer (madrassöverdrag, sängkläder etc.) skall tvättas vid minst 70° C under minst 10 minuter med oparfymrat tvättmedel, enligt standard *"SS-EN 14065:2016 Textil - Textilier behandlade i tvätterier - Kontrollsystem för biokontamination"*.

Överdraget kan tvättas i tvättmaskin max 95° C grader.

RENGÖRING AV CELLER SAMT LUFTSLANG

Cellerna kan tvättas separat eller i grupp. Använd fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Luftslangen torkas av med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.

RENGÖRING AV LUFTFILTER

Pumpen har ett luftfilter som lätt kan komma åt genom en inspektionssluckan på baksidan av pumpen. (Se bild nedan). Filtret tvättas med mildt rengöringsmedel.



HANDTEST

Kontrollera madrassens funktion med ett enkelt handtest.

För att säkerställa att madrassen ger rätt terapeutisk funktion genomförs ett enkelt handtest. Testet bör genomföras varje gång en madrass tas i funktion för att eventuella problem med madrassens lufttryck ska upptäckas. Testet säkerställer att patienten inte "bottnar".

Hur handtestet utförs.

Handtestet genomförs alltid med patienten på madrassen. Viktigt är också att be patienten att inte försöka lyfta sin kropp under testet utan att ligga som vanligt. *(Det är inte ovanligt att patienter lyfter sin kropp i tron att man underlättar för personalen vilket ger ett felaktigt testresultat.)*

- Vik undan lakan och öppna madrassens överdrag för att komma åt cellerna.
- Stoppa in handen mellan cellerna med patienten på madrassen. *(Se illustration)*
- Säkerställ att handen ryms mellan sängbotten och patient.



Om handtestet visar att patienten ligger igenom.

Om patienten ligger igenom och inget larm har gått behöver komfortläget höjas. Om komfortläget är på max och patienten inte väger mer än rekommenderad maxvikt behöver madrass och pump felsökas av behörig personal.

ÅTERVINNING

Allt material i din OptiCell luftmadrass-system, undantaget vissa delar i pumpen, kan energiåtervinnas genom förbränning vid därför avsedda förbränningsanläggningar. Produkten innehåller ingen PVC



PUMP

Förbrukad OptiCell®-pump får ej demonteras, utan lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Elektronikavfall".

MADRASS

OptiCell luftmadrassen kan lämnas till återvinningsstation och källsorteras som "Brännbart avfall". För mer information kontakta Järven HealthCare.

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete.

Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjlig miljöavtryck. Järven Health Care är ansluten både till REPA-registret samt El-kretsen AB och uppfyller därigenom sitt producentansvar.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven HealthCare.



ÖVRIG INFORMATION

PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat.

Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Under normala förhållanden och skötsel är förväntad livslängd 5 år för våra OptiCell system.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamationensärende ske enligt våra instruktioner.

Returneras produkt innan reklamationensärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

SYMBOLFÖRKLARING



Anger artikelnummer



Anger serienummer



Anger batchnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Anger tillverkningsdatum




Anger tillverkare




Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745



Läs bruksanvisningen innan användning

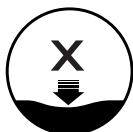

Anger upp till den sårkategori madrassen är anpassad för.

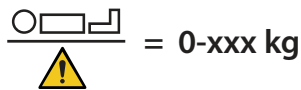

Anger max brukarvikt.




Maskintvätt 95 grader




Maskintvätt 70 grader, max 95 grader




Använd ej klorhaltiga rengöringsmedel

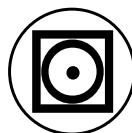

Tål torktumlning låg temperatur

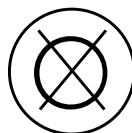

Ej kemtvätt

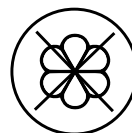

Använd ej sköljmedel



Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknanderengöringsmedel med tensider



Plaster får inte placeras i kontakt med madrassen

TILLBEHÖR, OPTICELL

ARTIKELNR.	NAMN	FÖR MODELL
12-960704-003	TPU Cell ej ventilerande	OC 4 NX / 4 PRO 90 cm
12-960704-004	TPU Cell ej ventilerande	OC 4 NX / 4 PRO 105 cm
12-960704-005	TPU Cell ej ventilerande	OC 4 NX / 4 PRO 120 cm
12-960603-003	TPU Cell huvud	OC 4 NX / 4 PRO 90 cm
12-960603-004	TPU Cell huvud	OC 4 NX / 4 PRO 105 cm
12-960603-005	TPU Cell huvud	OC 4 NX / 4 PRO 120 cm
12-960805-003	TPU Cell ventilerande	OC 4 NX / 4 PRO 90 cm
12-960805-004	TPU Cell ventilerande	OC 4 NX / 4 PRO 105 cm
12-960805-005	TPU Cell ventilerande	OC 4 NX / 4 PRO 120 cm
12-960301-003	TPU Cell ej ventilerande	OC 3 NX / 3 PRO 90 cm
12-960805-004	TPU Cell ej ventilerande	OC 3 NX / 3 PRO 105 cm
12-960805-005	TPU Cell ej ventilerande	OC 3 NX / 3 PRO 120 cm
12-960502-003	TPU Cell ventilerande	OC 3 NX / 3 PRO 90 cm
12-960502-004	TPU Cell ventilerande	OC 3 NX / 3 PRO 105 cm
12-960502-005	TPU Cell ventilerande	OC 3 NX / 3 PRO 120 cm
12-960201-003	Nylon/PU cell ej ventilerande	OC 2 NX / 2 PRO och Gentle 90 cm
12-960201-004	Nylon/PU cell ej ventilerande	OC 2 NX / 2 PRO och Gentle 105 cm
12-960201-005	Nylon/PU cell ej ventilerande	OC 2 NX / 2 PRO och Gentle 120 cm
12-960402-003	Nylon/PU cell ventilerande	OC 2 NX / 2 PRO och Gentle 90 cm
12-960402-004	Nylon/PU cell ventilerande	OC 2 NX / 2 PRO och Gentle 105 cm
12-960402-005	Nylon/PU cell ventilerande	OC 2 NX / 2 PRO och Gentle 120 cm
12-970103-008	OptiTex 4 hygienöverdrag, 200x90x20 cm	OC 2 PRO/3 PRO, 4 NX/4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
12-970103-009	OptiTex 4 hygienöverdrag, 200x105x20 cm	OC 2 PRO/3 PRO, 4 NX/4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
12-970103-010	OptiTex 4 hygienöverdrag, 200x120x20 cm	OC 2 PRO/3 PRO, 4 NX/4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
12-970102-028	OptiTex 3 hygienöverdrag, 200x 90x13 cm	OC 2NX och OC 3NX
12-970102-029	OptiTex 3 hygienöverdrag, 200x105x13 cm	OC 2NX och OC 3NX
12-970102-030	OptiTex 3 hygienöverdrag, 200x120x13 cm	OC 2NX och OC 3NX
12-990400-001	OptiCell pump OC-20	OC 2 NX / OC 2 PRO samt Gentle
12-990500-001	OptiCell pump OC-30	OC 3 NX / OC 3 PRO och OC 4 PRO
12-990600-001	OptiCell pump OC-31	OC Gentle
12-990700-001	OptiCell pump OC-40	OC 4 NX
12-960902-002	Koppling ink. CPR	
12-999800-004	Säkring för pump OC-20, OC-30, OC-31 och OC-40	
12-999900-005	Sängkrok till pump OC-20, OC-30, OC-31 och OC-40 <i>(Levereras parvis)</i>	
12-999600-004	Luftfilter för pump OC-20, OC-30, OC-31 och OC-40	
12-980000-001	OptiCell transportväska	OC 4 NX och 4 PRO
12-980000-002	OptiCell transportväska	OC 2 PRO och 3 PRO
12-980000-003	OptiCell transportväska	OC 2 NX och 3 NX
12-960901-003	Lakanssträckare	

För ytterligare tillbehör eller frågor vänligen kontakta Järven Health Care





OptiCell SMART Bruksanvisning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning
vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**

 **Järven Health Care**



OptiCell AB, Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se