



# Air0

Deluxe-madrass med hög komfort och extra lågt mottryck

Välj Air0 när hygien och patient står i fokus. Air0 är vår mest påkostade hygienmadrass med laminerat LENTEX-hygienöverdrag. Skumvalen har gjorts för att ge hög komfort och möjliggöra nedsänkning och omslutning. Madrassen har i oberoende tester verifierats med resultatet extra lågt mottryck.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Utvecklad som ett hjälpmedel i en förebyggande och behandlande trycksårsvård.
- **FÖR DE MEST SKÖRA PATIENTERNA.** Air0 är speciellt utformad för att ge effektiv tryckfördelning till patienter med långvarig sjukdom och ökad risk för trycksår. Madrasskärnan kombinerar 3 olika skumtyper i 6 lager, vilket bidrar till komfort och ett lågt mottryck.
- **INGEN SEPARAT HÄLZON KRÄVS.** Det dokumenterat låga mottrycket för hälar och skuldror ger effektiv tryckfördelning – därav inget behov av separat hälzon.
- **UPP TILL OCH MED 300 KG.** Robust konstruktion och noggrant utvalda material gör att Air0 ger samma höga komfort och tryckavlastning även för brukare med högre kroppsvikt.



# Air0


## DELUXE-MADRASS MED HÖG KOMFORT OCH EXTRA LÅGT MOTTRYCK.

Dokumenterad för extra lågt mottryck i alla belastningskategorier.

### Effektiv tryckfördelning - även i sittläge

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat, vilket ger en trygg användning även vid höjt ryggläge.

2 cm supersoft kallsaum 23kg/m <sup>3</sup>
4 cm Flex viskoelastiskt skum 50 kg/m <sup>3</sup>
2x4 cm Waterlilysaum 51 kg/m <sup>3</sup>
4 cm Flex viskoelastiskt skum 50 kg/m <sup>3</sup>
2 cm supersoft kallsaum 23kg/m <sup>3</sup>

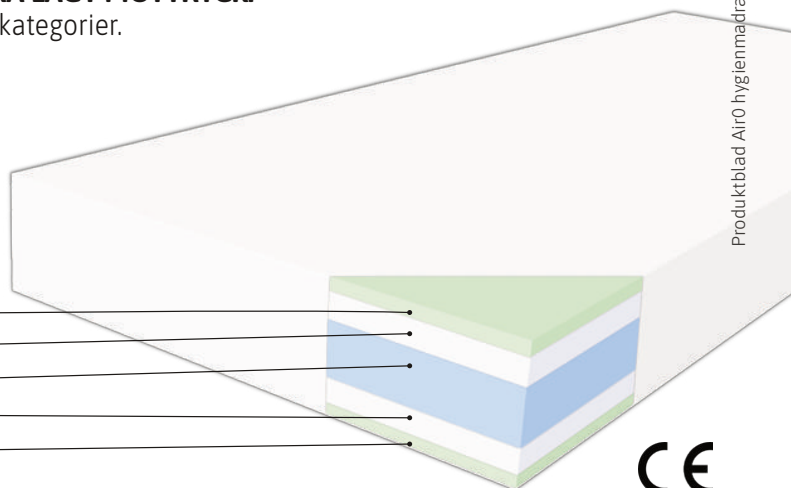

### STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKFÖRDELANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckfördelande egenskaper har RISE\* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Air0 har testats av RISE\* enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.


Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra Låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Air0	26	43	42


\* Research Institutes of Sweden

\*\* Klassificering enligt tidigare grundförslaget i standarden

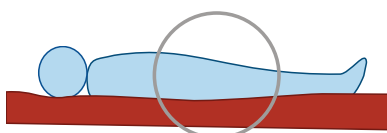


#### Stor intryckskropp, 300 N

Simulerar tryck från en brukare på cirka 80 kg som ligger på rygg i sängen.

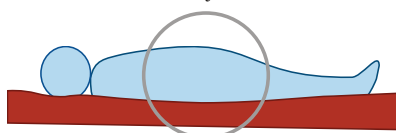

#### Stor intryckskropp, 600 N

Simulerar tryck från brukare ca 120 kg, eller brukare som sitter upp alt. ligger på sidan.

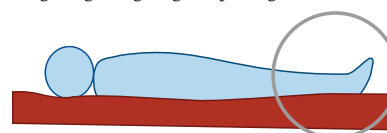

#### Liten intryckskropp, 40 N

Simulerar trycket från utstickande kroppsdelar som exempelvis hälar, armbågar eller axlar.

## Produktspecifikationer

<b>Material</b>	2 cm supersoft kallsaum 23kg/m <sup>3</sup> , 4 cm Flex viskoelastiskt skum 50 kg/m <sup>3</sup> 2x4 cm Waterlilysaum 51 kg/m <sup>3</sup> 4 cm Flex viskoelastiskt skum 50 kg/m <sup>3</sup> 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m <sup>3</sup> . Ytskiktet LENTEX är av polyuretan.
<b>Storlekar</b>	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 20 cm. (För andra storlekar kontakta Järven Health Care)
<b>Hygien</b>	ISO 811:2018.
<b>Madrassvätt</b>	Godkänd för Sonosteam/Semistaal.

<b>Madrassvikt</b>	15-23 kg beroende på längd och bredd.
<b>Brukarvikt</b>	Upp till och med 300 kg.
<b>Sårkategori</b>	Upp till och med kategori 3.
<b>Garanti</b>	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av LENTEX.
<b>Brand</b>	SS 87600 01. Testmetod EN 597-1 & EN 597-2.



Bromsvägen 3 | 891 60 Örnsköldsvik | Sverige  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se