



Flex-bäddmadrass

Bäddmadrass med LENTEX laminat för god hygien och tryckfördelning

Flex en hygienisk bäddmadrass som erbjuder tryckfördelning och är utvecklad som hjälpmedel vid behandling av trycksår, muskel- och ryggsmärtor, sömnbesvär m.m. För att ge bästa möjliga tryckfördelning och komfort bör Flex bäddmadrass användas i kombination med en bra basmadrass.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 2.**
Utvecklad som ett hjälpmedel i en förebyggande och behandlande trycksårsvård.
- **HELT UTAN SÖMMAR OCH DRAGKEDJOR** för att minska risken för kontaminering av madrassens skumkärna.
- **VITT YTSKIKT.**
Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING.**
Tack vare ytskiktets unika struktur har studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer desinfektionsmedel* vid rengöring.

* Studie, Tyskland 1999



Flex bäddmadrass

BÄDDMADRASS MED LENTEX LAMINAT FÖR GOD HYGIEN OCH TRYCKFÖRDELNING.


Flex hygienmadrass är en bäddmadrass i trögelastisk polyeter som formar sig av kroppens temperatur. Bäddmadrassen är utvecklad för att ge hög komfort och god tryckavlastning när den används i kombination med en bra basmadrass. Flex bäddmadrass rekommenderas speciellt till patienter med trycksår, rygg- och muskelsmärter samt sömnbesvär.

Laminerad med Lentex - västkeavvisande egenskaper

Ytskiktet är vätskeavvisande och tät. Madrassens Active Membrane-teknologi gör att madrassen "andas" samtidigt som risken att vätska kan tränga in i madrasskärnan minskar.

Tryckavlastande funktioner

Vårt unika ytskikt LENTEX är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska trycket mot patienten genom Nedsänkning och Omslutning samtidigt som god komfort erbjuds. Nedsänkning och Omslutning är de två viktigaste biokemiska egenskaperna för minska risken för trycksår[1].

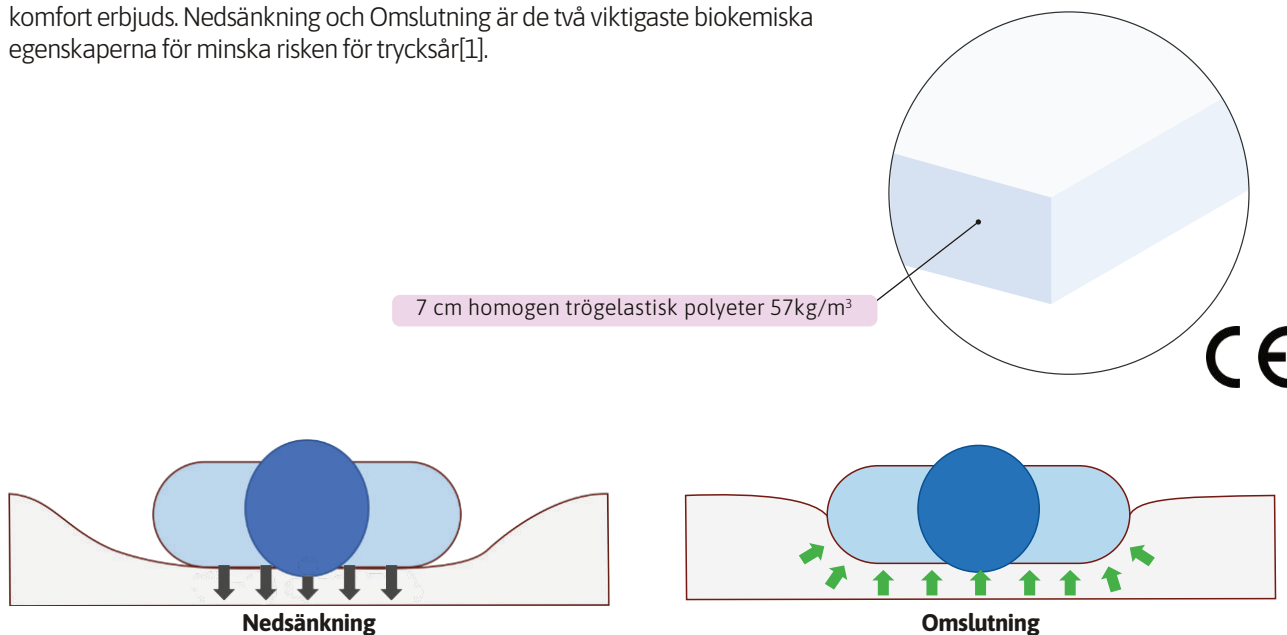

[1] Wounds International 2020 | Vol 11 utgåva 4 | Gefen A and Soppi E, sid 39

"De två viktigaste biomekaniska egenskaperna som avgör hur effektivt en stödyta minskar risken för trycksår hos patienter med nedsatt rörlighet eller sensoriska funktioner är nedsänkning och omslutning.

- Nedsänkning är det djup som en patients kropp tränger igenom när den placeras på en stödyta.
- Omslutning är stödytans förmåga att forma sig runt patientens kropp."

Produktspecifikationer

Material	7 cm homogen trögelastisk polyeter 57kg/m ³ , Ytskiktet LENTEX® är av polyuretan.	Madrassvikt	6 kg beroende på bredd.
Storlekar	200 x 80/85/90 x 7 cm. (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)	Max brukarvikt	150 kg.
Sårkategori	Upp till och med kategori 2.	Garanti	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av LENTEX.
Hygien	ISO 811:2018.	Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2).
Madrassvätt	Godkänd för Sonosteam/Semistaal.		



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
 www.jarven.se | healthcare@jarven.se