



# MELISSA 12 - *Bäddmadrass*

## En stabil och behandlande bäddmadrass upp till trycksårskategori 2

Med Melissa 12 bäddmadrass får du en stabil bäddmadrass som är utvecklad som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande vård av patienter med trycksår upp till kategori 2. Med en tjocklek på 6 cm och tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplementet till din befintliga sjukvårdsmadrass. Med möjligheten att vända och rotera kärnan får du en långvarig användning med bibehållen kvalitet.

- **HÅLLBAR OCH STABIL MADRASS.** Tack vare ett högelastiskt kallskum.
- **ERBJUDER LÅNG LIVSLÄNGD AV MADRASS.** Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa 12 bäddmadrass.
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED ELLER UTAN RESÅR.** Bäddmadrassen levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget kan levereras med resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.




# Melissa 12 - Bäddmadrass

## EN STABIL OCH BEHANDLANDE BÄDDMADRASS.

Med Melissa 12 bäddmadrass får du en stabil bäddmadrass som är utvecklad som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande vård av patienter med trycksår upp till kategori 2. Det tvåstretchiga hygienöverdraget är designat för att minska risken för skjuv och samarbeta med skumkärnan för att ge bra tryckavlastning.

### Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa 12 bäddmadrass levereras med RXS-5. Ett hygienöverdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig polyuretanväv med resår i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats. Överdraget har dragkedja med droppkant på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Finns även med svetsade sömmar, modell RXS-W.

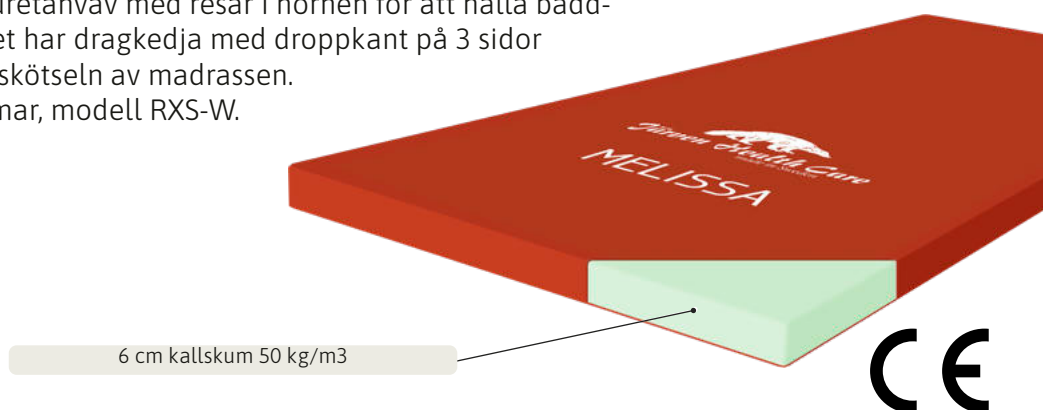

### STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE\* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa 12 bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

### Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa 12, bäddmadrass	27	41	44

\*RISE, Research Institutes of Sweden

## Produktspecifikationer

**Material** 6 cm kallskum 50 kg/m<sup>3</sup>

**Storlekar** 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm  
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

**Madrassvikt** ca 5 kg beroende på längd och bredd

**Sårkategori** Till och med kategori 2

**Brukarvikt** Upp till och med 180 kg.

**Brand** SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se