



MELISSA Parad - *Bäddmadrass*

En bäddmadrass i hög kvalitet utvecklad för att skapa trygga vårdmiljöer

Upplev hög komfort och förebygg trycksår med Melissa Parad bäddmadrass. Med en tjocklek på 6 cm och goda tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplementet till din befintliga vårdmadrass. Med möjligheten att vända och rotera kärnan får du dessutom en långvarig användning med bibehållen kvalitet.

- **UTMÄRKTA TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.**
Tack vare ett högelastiskt hypersoft-skum.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.**
Tillsammans med en sjukvårdsmadrass är Melissa Parad bäddmadrass utvecklad som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande vård av patienter med trycksår upp till kategori 3.
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED RESÅR.**
Bäddmadrassen levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget har resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.
- **ERBJUDER LÅNG HÅLLBARHET AV MADRASS.**
Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa Parad bäddmadrass



Melissa Parad - Bäddmadrass

UTVECKLAD FÖR ATT SKAPA TRYGGA VÅRDMILJÖER.

Melissa Parad bäddmadrass är framtagen för att ge tryckavlastning och komfort. Tack vare madrassens tryckavlastande egenskaper ges hela madrassen avlastning åt känsliga kroppsdelar som axlar, hälar och armbågar. Därför krävs ingen separat hälzon.


Det tvåstretchiga hygienöverdraget är även designat för att minska risken för skjuv.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Parad bäddmadrass levereras med RXS-5. Ett överdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig polyuretanväv med dragkedja på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen.

Samtliga dragkedjor har droppkant.

Finns även med svetsade sömmar, modell RXS-W.

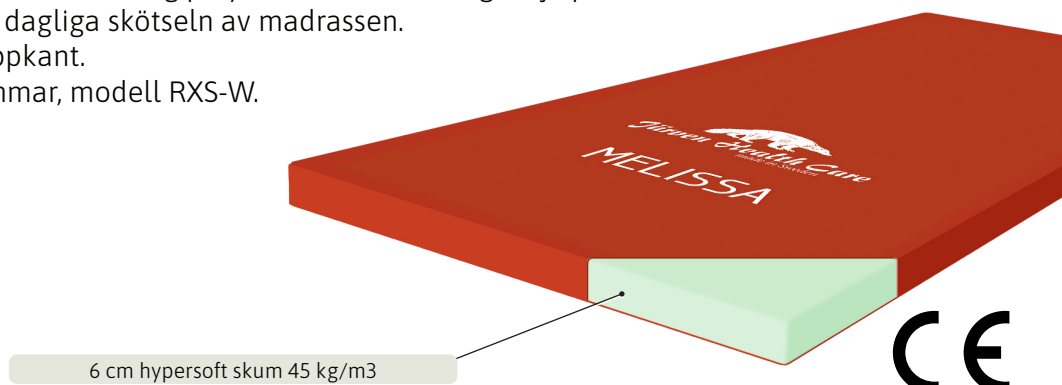

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa Parad bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Parad bäddmadrass	24	43	42

*RISE (Research Institutes of Sweden), a Swedish independent research institute - www.ri.se

Produktspecifikationer

Material 6 cm hypersoft skum 45 kg/m³.

Storlekar 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm.
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

Sårkategori Till och med kategori 3.

Madrassvikt ca 5 kg beroende på längd och bredd.

Brukarvikt Upp till och med 180 kg.

Brand SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2).

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se