



# Soft Euroflex

Vår mest populära hygienmadrass för komfort och tryckfördelning

Soft Euroflex är en hygienmadrass i LENTEX-serien, vår mest sålda skummadrass i kategorin trycksårsprevention. Den genomtänkta skumkombinationen minskar mottrycket på känsliga punkter och ger skonsam avlastning för brukare upp till 180 kg.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Utvecklad som ett hjälpmedel i en förebyggande och behandlande trycksårsvård.
- **MINSKA RISKEN FÖR KONTAMINERING.** Helt utan sömmar och dragkedjor för att minimera risken av kontaminering av madrassens skumkärna.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING.** Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer desinfektionsmedel\* vid rengöring.
- **UNDERLÄTTAR UPPTÄCKT AV KONTAMINERING.** Med ett Semi-transparent laminat, blir det enklare att upptäcka kontaminerade skumkärnor och det vita ytskiktet underlättar upptäckt av föroreningar.

\* Studie, Tyskland 1999

# Soft Euroflex


VÅR MEST POPULÄRA HYGIENMADRASS FÖR KOMFORT OCH TRYCKAVLASTNING.

## Mycket god tryckfördelning

Madrassen har dokumenterat lågt tryck (45 mm/Hg) för utsatta kroppsdelar som hälar och skuldror, vilket gör att en separat hälzon inte behövs. Enligt mätmetoden nedan uppvisar Soft Euroflex även lågt tryck över hela kroppen, oavsett kroppsvikt upp till 180 kg.

## Jämn tryckfördelning

Genom att anpassa sig efter kroppens konturer via Nedsänkning och Omslutning avlastas utsatta kroppsdelar. Trycknivån förblir låg både lokalt och över hela kroppen, vilket kan gynna personer med långvarig smärtproblematik.

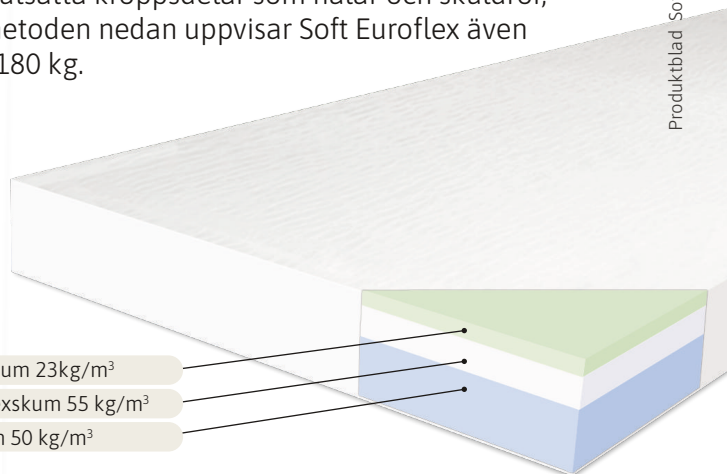

- 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m<sup>3</sup>
- 4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m<sup>3</sup>
- 7 cm Waterlilyskum 50 kg/m<sup>3</sup>



## STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKFÖRDELANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckfördelande egenskaper har RISE\* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Soft Euroflex har testats av RISE\* enligt SS 876 00 13 och är tryckfördelande upp till och med sårkategori 3.


Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög	**
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9	
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9	
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9	

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Soft Euroflex	26	48	45


\* Research Institutes of Sweden

\*\* Klassificering enligt tidigare grundförslaget i standarden

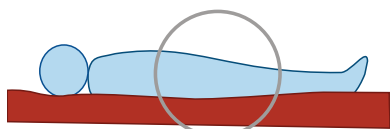


### Stor intryckskropp, 300 N

Simulerar tryck från en brukare på cirka 80 kg som ligger på rygg i sängen.

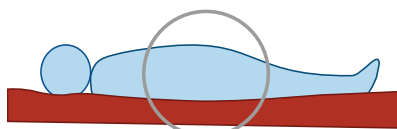

### Stor intryckskropp, 600 N

Simulerar tryck från brukare ca 120 kg, eller brukare som sitter upp alt. ligger på sidan.

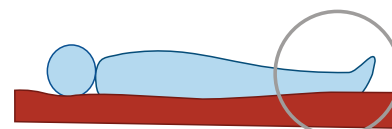

### Liten intryckskropp, 40 N

Simulerar trycket från utstickande kroppsdelar som exempelvis hälar, armbågar eller axlar.

## Produktspecifikationer

**Material** 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m<sup>3</sup>,  
4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m<sup>3</sup>  
7 cm Waterlilyskum 50 kg/m<sup>3</sup>.  
Ytskiktet LENTEX är av polyuretan.

**Storlekar** 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm.  
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care)

**Sårkategori** Upp till och med kategori 3.

**Hygien** ISO 811:2018.

**Madrasstätt** Godkänd för Sonosteam/Semistaal.

**Madrasvikt** 11-13 kg beroende på längd och bredd.

**Max brukarvikt** 180 kg.

**Garanti** 3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.  
5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av Lentex.

**Brand** SS 87600 01, normalrisk.  
Testmetod EN 597-1 & 2.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se