

MAGMA

Hygienmadrass



With  **Lentex**[®]

Utvecklad för miljöer där man ställer extra höga brandkrav såsom psykiatriska kliniker, häkten och behandlingshem.


Järven Health Care

Magma har en volymvikt av 37kg/m³. Ytskiktet Lentex® omsluter madrasskärnan. Magma hygienmadrass uppfyller BS 7177:2008 Medium Hazard samt SS 876 00 10 testmetod NT-Fire 055 ett av de tuffaste brandkraven för madrasser.

VÅRT UNIKA YTSKIKT LENTEX®


Denna madrass är utrustad med Järvens unika ytskikt Lentex® som lamineras direkt på skumkärnan. Det medför att den saknar sömmar och dragkedjor.

Ytskiktet levereras i en fräsch vit färg som gör det lättare att upptäcka föroreningar på madrassens yta.

Lentexmadrassen rengörs genom avtorkning och desinficering direkt på madrassen.

Aktiv Membran-teknologi gör att madrassen kan andas och minskar risken att vätska kan tränga in.

Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska trycket mot patienten och ge en god komfort.

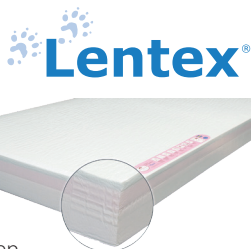

Magma hygienmadrass var den första hygienmadrassen i Sverige som vid testning av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) uppfyllde brandstandarden SS 876 00 10, testmetod NT-Fire 055 - ett av världens högsta brandkrav för madrasser. Magma uppfyller även BS7188:2008 Medium Hazard.

FAKTA

Art. Nr.	Storlekar
11-010300-001	200 x 80 x 12 cm
11-010300-002	200 x 85 x 12 cm
11-010300-003	200 x 90 x 12 cm

Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Healthcare.

Sårkategori: Till och med kategori 2

Madrassvikt: Ca. 7-9 kg beroende på längd och bredd (standardstorlekar).

Garanti - Madrasskärnan: 2 år på utmattningsgrad av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.

Garanti - Lentex: 5 år på vidhäftningen av Lentex.

Brandstandard: Madrassen är testad och uppfyller SS 876 00 10, testmetod NT-Fire 055 och EN 597-1 & 2.

Brukarvikt: 1-150 kg.
Läs mer om brukarvikt i vår bruksanvisning.

Återvinning: Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Märkning: Tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötsel-anvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Tryckmättningsresultat

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
airO	28,5	43,1	45,2
Soft Euroflex	28,9	61,1	52,1
Waterlily	30,1	55,9	56,4
Exclusive	35,9	53,0	59,2
Soft Comfort	37,5	53,6	60,5
Comfort	41,9	54,5	64,5
Magma	36	56	52

Lågt värde ger lågt tryck mot kroppen, alla värden i mm Hg. För tunga brukare är det särskilt viktigt att trycket under "stor intryckskropp, 600 N" är så lågt som möjligt.

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.


Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se