



Vår bästa
trycksårspåbyggande
hygienmadrass.



Unika ytskiktet
Lentex för ökad
komfort

Andas genom
Active membrane
teknik

Utan sömmar
och dragkedjor
för ökad hygien

Förebygger
trycksår upp till
sårkategori 3

BESKRIVNING

air0, en hygienmadrass framtagen som ett hjälpmedel för behandling av trycksår upp till kategori 3. Den är speciellt framtagen för att behandla trycksår i flera kategorier och erbjuder dessutom avlastning för såväl lättare som tyngre personer. Det noga utvalda sammansättningen av skum tillsammans med det unika ytskiktet Lentex® gör att air0 passar utmärkt i vård- och omsorgsmiljöer.

Skjuvkrafter minskar genom madrassens genomtänkta uppbyggnad.

Hygienmadrass

Madrassen är testad enligt standard SS EN 20811 och har ett laminerat ytskikt av Lentex® som helt saknar sömmar och dragkedjor vilket ger ökade förutsättningar för god hygien. Det vita ytskiktet underlättar dessutom för personal att upp-täcka föroreningar på madrassens yta som, vid kontaminering, snabbt kan rengöras genom avtorkning och desinficering. Ytskiktet är vätskeavvisande och tätt samtidigt som madrassens Active Membrane-teknologi gör att madrassen kan andas.

Godkänd för säng- och madrasstvätt

Då det blir allt vanligare med automatiserade säng- och madrasstvättar är det viktigt med produkter som klarar av den hanteringen. Våra Lentexmadrasser har testats och godkänts helt utan anmärkning för användning med säng- och madrasstvätt från Sonosteam/Semi Staal.


Tryckavlastande funktioner

Madrassen är uppbyggd av sex (6) lager noga utvalda skumtyper med en total höjd på 20 cm.

Tillsammans med vårt unika ytskikt Lentex® ger detta goda hygienegenskaper.

Lentex® Soft Euroflex har testats av Swerea MF enligt mätmetod SS 876 00 13.

Testresultatet redovisas nedan.

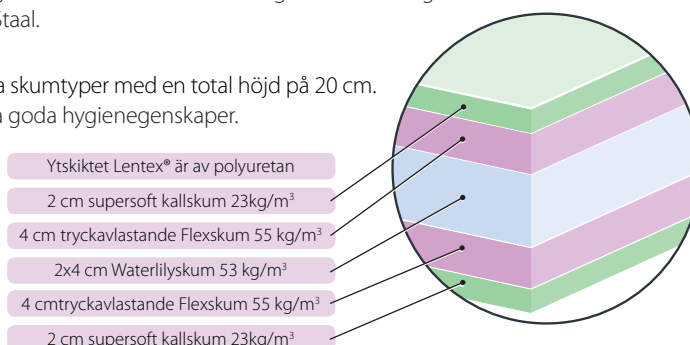

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
air0	28,5	43,1	45,2

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Material	2 cm supersoft kallsaum 23kg/m ³ , 4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m ³ , och 7 cm Waterlilyiskum 53 kg/m ³ . Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
Storlekar	200 x 80/85/90 x 20 cm (Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Healthcare.)
Sårkategori	Till och med kategori 3
Madrassvikt	11-13 kg beroende på längd och bredd (standardstorlekar)
Hygien	SS-EN 20811.

Brukarvikt	20-300 kg.
Garanti	4 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år på vidhäftningen av Lentex.
Brandstandard	SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2
Återvinning	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, standarder & placering i säng. Plats finns för egen märkning.



certified for use with Sonosteam/Semi Staal



Järven Healthcare

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
 www.jarven.se | healthcare@jarven.se