


OPTICELL GENTLE

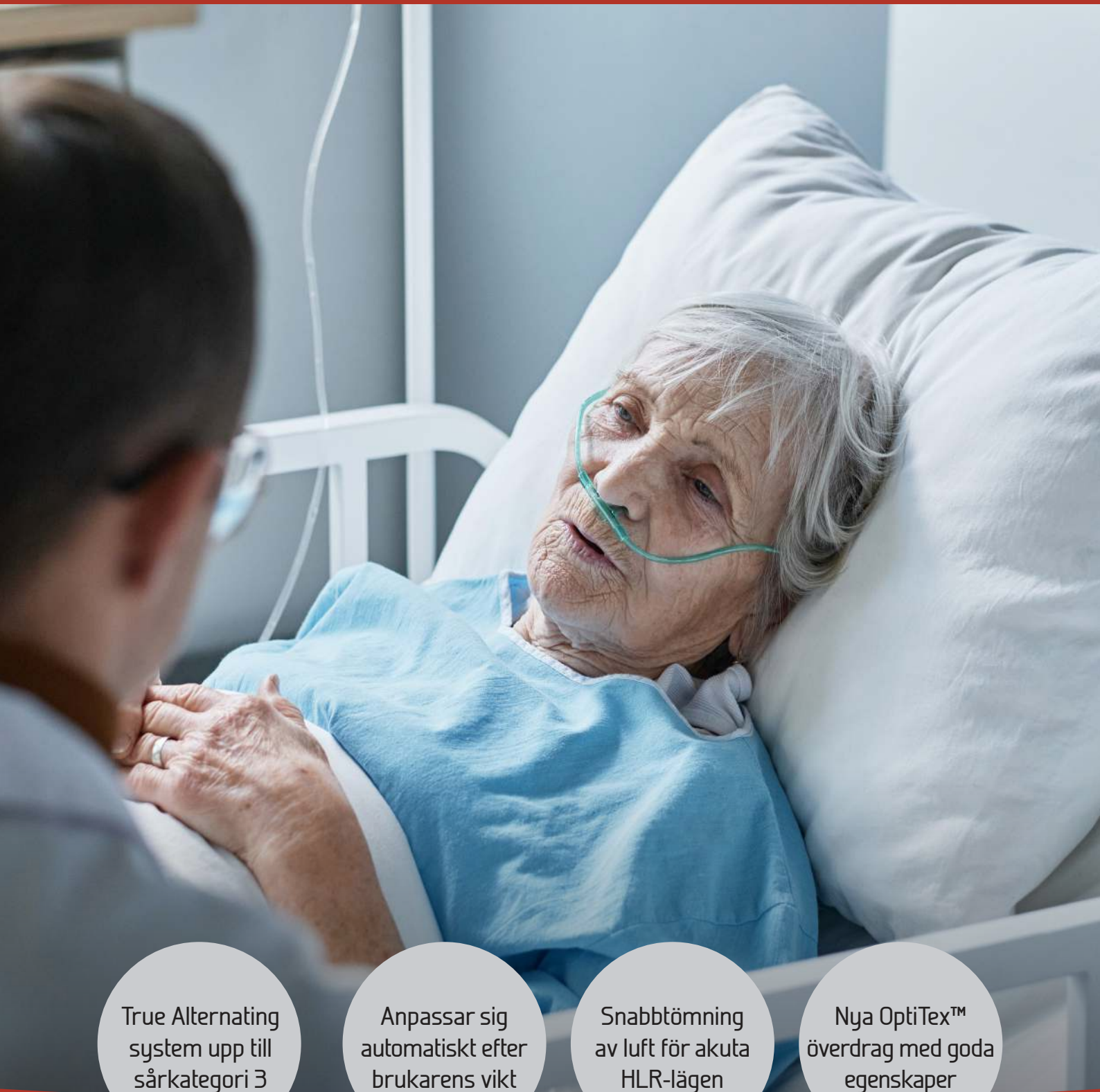

True Alternating
system upp till
sårkategori 3

Anpassar sig
automatiskt efter
brukarens vikt

Snabbtömning
av luft för akuta
HLR-lägen

Nya OptiTex™
överdrag med goda
egenskaper

*En statisk smärtlindrande ersättningsmadrass med
hygienöverdrag, automatisk pump och utbytbara celler.*

OPTICELL GENTLE

OptiCell Gentle är en statisk luftmadrass som används för smärt- och högriskpatienter och som hjälper vid behandling av trycksår upp till och med kategori 3. OptiCell Gentle är en 18 cm hög madrass med en integrerad skumkärna. Cellerna som är 13 cm höga är enkelt utbytbara och levereras med ett avtagbart svetsat hygienöverdrag med droppskydd.

Madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

OptiCell Gentle levereras med en energisnål, tystgående pump, OC31, som är lätt att använda. Att fylla madrassen, som placeras direkt på sängbotten, tar normalt ca 15 minuter att fylla.

EGENSKAPER – Pump och celler

CPR VENTIL – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

ALARMFUNKTION – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

HÄLAVLASTNING – Madrassen är utrustad med nett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftflås.

EXTRA LÅNG ELKABEL – Vi har sett att avståndet till närmaste eluttag kan variera och levererar därför madrassen med en 6 meter lång kabel.

EGENSKAPER – OptiTex™ överdrag

INTEGRERAD KABELHÅLLARE för att minska risken för bakteriespridning. Samtidigt som elsladden hålls ur vägen och skyddar luftslangarna.

GOD HYGIEN, överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och även maskintvättas i 95°C. Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

LOW AIR LOSS FUNKTION tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta för att minska risken för hudmaceration och andra komplikationer för brukaren.

DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS på fyra sidor. Svetsade sömmar.

UNDERSIDA MED ANTIGLID-FUNKTION OCH FYRA FÅSTBAND.

FYRA STYCKEN HANDTAG för att underlätta vid förflyttning

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 18 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1-3*

CELLER Madrassen har 17 utbytbara celler tillverkade i mjuk TPU (polyuretan) med Low Air Loss funktion.

ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

PUMP OC31 är en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klar att använda. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

GARANTI 2 år på fabrikationsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT Upp till 250 kg.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

VIKT Madrass 96 kg (200 x 90 cm), pump 2,6 kg

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrassen med celler och slangar är PVC-fri



* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.
Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP),
tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



OptiTex™ – hygienöverdrag med goda egenskaper



ÖVERDRAGETS
VATTENTÄLIGHET
ISO 811-1981



LUFTGENOM-
SLÄPPLIGHET
ISO 11092



ÖVERDRAGETS
BRANDSTANDARD
BS EN 597-1 & 2



ÖVERDRAGETS
STRÄCKTÄLIGHET
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK
FÖRMÅGA
ISO 811-1981