



Järven Health Care

FLEX bäddmadrass

Bäddmadrass med vårt unika ytskikt Lentex[®]



Ytskiktet
Lentex för ökad
komfort

Utan sömmar
och dragkedjor
för ökad hygien

Andas genom
Active membrane
teknik

Utvecklad
för att ge god
komfort

BESKRIVNING – FLEX BÄDDMADRASS

Flex hygienmadrass är en bäddmadrass i trögelastisk polyeter som formar sig av kroppens temperatur. Flex hygienmadrass ger tryckavlastning och är utvecklad för användning vid trycksår, rygg- och muskelsmärter, sömnbesvär m.m. Flex hygienmadrass bör användas i kombination med en bra basmadrass för att ge optimal tryckfördelning


Hygienmadrass

Flex bäddmadrassen har ett laminerat ytskikt av Lentex® och saknar därför helt sömmar och dragkedjor vilket ger ökade förutsättningar för god hygien. Det vita ytskiktet underlättar dessutom för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta som, vid kontaminering, snabbt kan rengöras genom avtorkning och desinficering. Ytskiktet är vätskeavvisande och tät. Madrassens Active Membrane-teknologi gör att madrassen andas samtidigt som risken att vätska kan tränga in minskar.

Tryckavlastande funktioner

Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska trycket mot patienten samt ge en god komfort. Flex bäddmadrass är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

7 cm homogen trögelastisk polyeter 57kg/m³

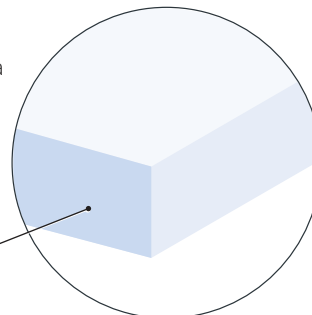

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Material	Flex bäddmadrass är uppbyggd av 7 cm homogen trögelastisk polyeter, 57 kg/m ³ . Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.	Brukarvikt	1 - 150 kg.
Storlekar	200 x 80/85/90 x 7 cm (Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)	Garanti	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år på vidhäftningen av Lentex.
Sårkategori	Till och med kategori 1.	Brandstandard	SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2.
Madrassvikt	6 kg beroende på längd och bredd. (standardstorlekar)	Återvinning	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Hygien	Uppfyller standard SS-EN 20811.	Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, standarder & placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se