


OPTICELL 2 NX^{V2}

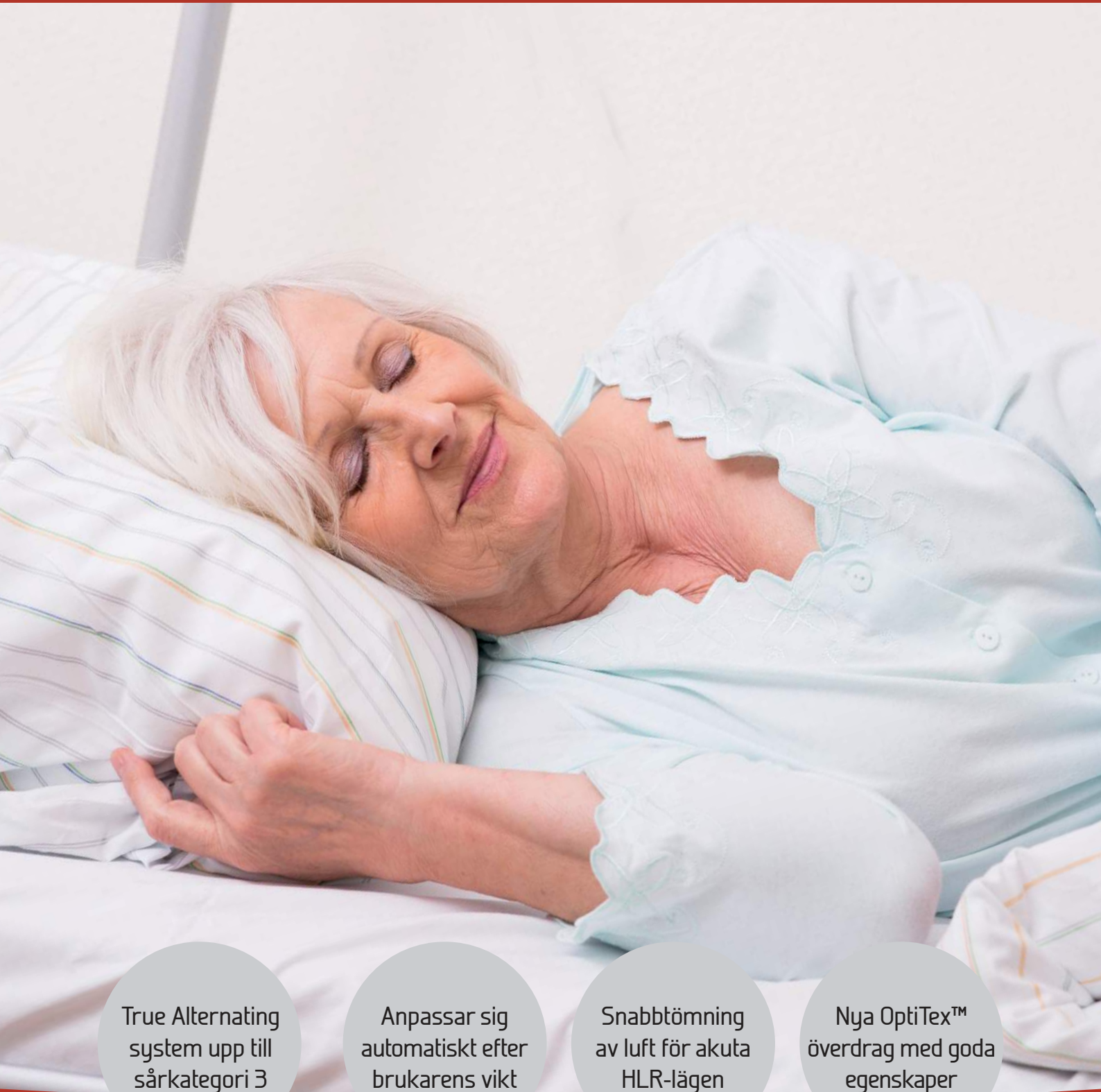

True Alternating
system upp till
sårkategori 3

Anpassar sig
automatiskt efter
brukarens vikt

Snabbtömning
av luft för akuta
HLR-lägen

Nya OptiTex™
överdrag med goda
egenskaper

*En alternerande bäddmadrass med hygienöverdrag,
automatisk pump och utbytbara celler.*

OPTICELL 2 NX V2

OptiCell 2 NX v2 är en alternerande och tryckavlastande luftmadrass utvecklad som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 3.

OptiCell 2 NX v2 är av typen bäddmadrass och placeras ovanpå en skum-madrass (ex vis någon av Järvens standardmadrasser). OptiCell 2 NX v2 levereras med ett slitålligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen. Den 13 cm tjocka madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss-funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

OptiCell 2 NX v2 är ett True Alternating system. Se separat blad för mer information om True Alternating.

EGENSKAPER – Pump och celler

KOMFORTFUNKTION med sex olika komfortlägen.

TRANSPORTLÄGE – Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar.

CPR VENTIL – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

ALARMFUNKTION – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

HÅLAVLASTNING – Madrassen är utrustad med nett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftlås.

EXTRA LÅNG ELKABEL – Vi har sett att avståndet till närmaste eluttag kan variera och levererar därför madrassen med en 6 meter lång kabel.

EGENSKAPER – OptiTex™ överdrag

INTEGRERAD KABELHÅLLARE för att minska risken för bakteriespridning, Samtidigt som elsladden hålls ur vägen och skyddar luftslangarna.

GOD HYGIEN, överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och även maskintvättas i 95°C. Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

LOW AIR LOSS FUNKTION tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta för att minska risken för hudmaceration och andra komplikationer för brukaren.

DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS på fyra sidor. Svetsade sömmar.

UNDERSIDA MED ANTIGLID-FUNKTION OCH FYRA FÄSTBAND.

FYRA STYCKEN HANDTAG för att underlätta vid förflyttning

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 13 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1–3*

CELLER Madrassen har 17 utbytbara celler tillverkade i mjuk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss funktion.

ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

PUMP OC-20 2.0 är en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klar att använda. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

GARANTI 2 år på fabrikationsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT Upp till 230 kg.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

VIKT Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pump 3,4 kg

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrassen med celler och slangar är PVC-fri



* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.
Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



OptiTex™ – hygienöverdrag med goda egenskaper



ÖVERDRAGETS
VATTENTÄLIGHET
ISO 811-1981



LUFTGENOM-
SLÄPPLIGHET
ISO 11092



ÖVERDRAGETS
BRANDSTANDARD
BS EN 597-1 & 2



ÖVERDRAGETS
STRÄCKTÄLIGHET
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK
FÖRMÅGA
ISO 811-1981



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se