


# OPTICELL GENTLE T7

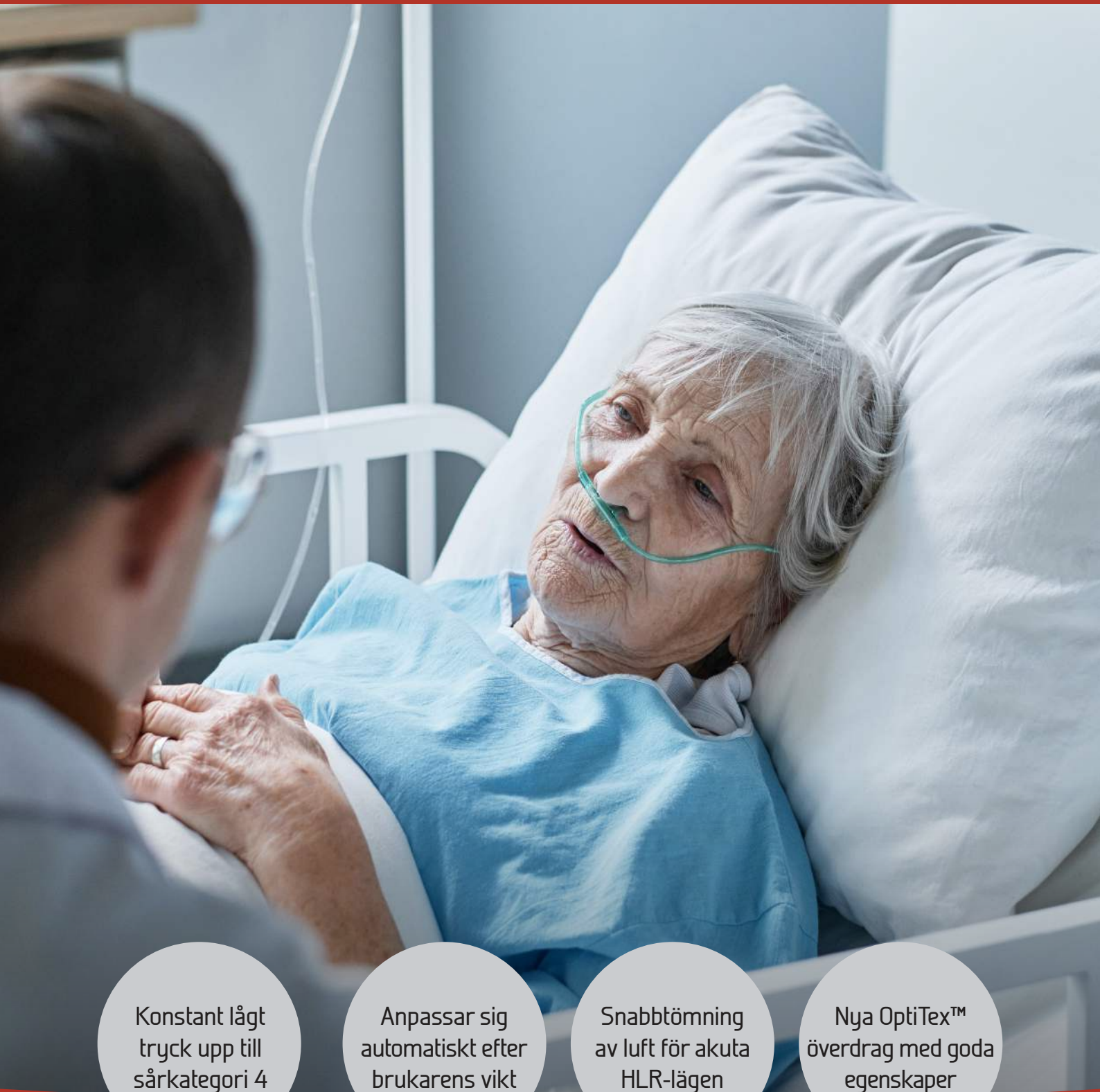

Konstant lågt tryck upp till sårkategori 4

Anpassar sig automatiskt efter brukarens vikt

Snabbtömning av luft för akuta HLR-lägen

Nya OptiTex™ överdrag med goda egenskaper

*En statisk smärtlindrande ersättningsmadrass med hygienöverdrag, automatisk pump och utbytbara celler.*

# OPTICELL GENTLE

**OptiCell Gentle är ett statiskt luftmadrasssystem med integrerad skumkärna** som används för smärt- och högriskpatienter och vid behandling av trycksår upp till och med kategori 4.

Madrassen har en höjd på 18 cm och levereras med ett avtagbart svetsat hygienöverdrag med droppskydd. De 13 cm höga cellerna är enkelt utbytbara.

Madrasssystemet har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss funktion för att minska risken för hudmaceration samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

OptiCell Gentle levereras med en energisnål, tystgående pump, OC31, som är lätt att använda. Att fylla madrassen, som placeras direkt på sängbotten, tar normalt ca 15 minuter.

## EGENSKAPER – Pump och celler

**CPR VENTIL** – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

**ALARMFUNKTION** – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

**HÅLAVLASTNING** – Madrassen är utrustad med nett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftflås.

**EXTRA LÅNG ELKABEL** – Vi har sett att avståndet till närmaste eluttag kan variera och levererar därför madrassen med en 6 meter lång kabel.

## EGENSKAPER – OptiTex™ överdrag

**INTEGRERAD KABELHÅLLARE** för att minska risken för bakteriespridning, Samtidigt som elsladden hålls ur vägen och skyddar luftslangarna.

**GOD HYGIEN**, överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och även maskintvättas i 95°C. Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

**LOW AIR LOSS FUNKTION** tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta för att minska risken för hudmaceration och andra komplikationer för brukaren.

**DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS** på fyra sidor. Svetsade sömmar.

**UNDERSIDA MED ANTIGLID-FUNKTION OCH FYRA FÅSTBAND.**

**FYRA STYCKEN HANDTAG** för att underlätta vid förflyttning

## Produktspecifikationer

**STANDARDSTORLEKAR** 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 18 cm.  
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

**TRYCKSÅRSKATEGORI** 1–4\*

**CELLER** Madrassen har 17 utbytbara celler tillverkade i mjuk TPU (polyuretan) med Low Air Loss funktion.

**ÖVERDRAG** OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

**PUMP OC31** är en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klar att använda. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

**GARANTI** 2 år på fabrikationsfel.

**BRANDSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 Ø-2.

**BRUKARVIKT** Upp till 250 kg.

**ÅTERVINNING** Se bruksanvisning

**VIKT** Madrass 11 kg (200 x 90 cm), pump 2,6 kg

**MÄRKNING** tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrassen med celler och slangar är PVC-fri



\* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.  
Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP),  
tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



## OptiTex™ – hygienöverdrag med goda egenskaper



ÖVERDRAGETS  
VATTENTÄLIGHET  
ISO 811-1981



LUFTGENOM-  
SLÄPPLIGHET  
ISO 11092



ÖVERDRAGETS  
BRANDSTANDARD  
BS EN 597-1 & 2



ÖVERDRAGETS  
STRÄCKTÄLIGHET  
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK  
FÖRMÅGA  
ISO 811-1981