



MELISSA 12 - *Bäddmadrass*

En stabil och behandlande bäddmadrass upp till trycksårskategori 2

Med Melissa 12 bäddmadrass får du en stabil bäddmadrass utvecklad för att minska risken för uppkomst av trycksår, kategori 2. Med en tjocklek på 6 cm och tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplement till din befintliga sjukvårdsmadrass.

- **HÖGELASTISKT KALLSKUM.** Melissa 12 bäddmadrass har ett höglastiskt kallsaum som ger en hållbar och stabil bäddmadrass.
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED ELLER UTAN RESÅR.** Bäddmadrassen levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget kan levereras med resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.
- **VÄNDBAR SKUMKÄRNA.** Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa 12 bäddmadrass




MELISSA 12 - Bäddmadrass

ETT UTMÄRKT KOMPLIMENT TILL DIN SJUKVÅRDSMADRASS.

Melissa 12 bäddmadrass är framtagen för att ge komfort och tryckavlastning upp till och med sårkategori 2. Det tvåstretchiga hygienöverdraget är designat för att minska risken för skjuv och samarbeta med skumkärnan för att ge bra tryckavlastning.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa 12 bäddmadrass levereras med RX-resår. Ett hygienöverdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig poluretannäv med resår i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats. Överdraget har dragkedja med droppkant på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen.

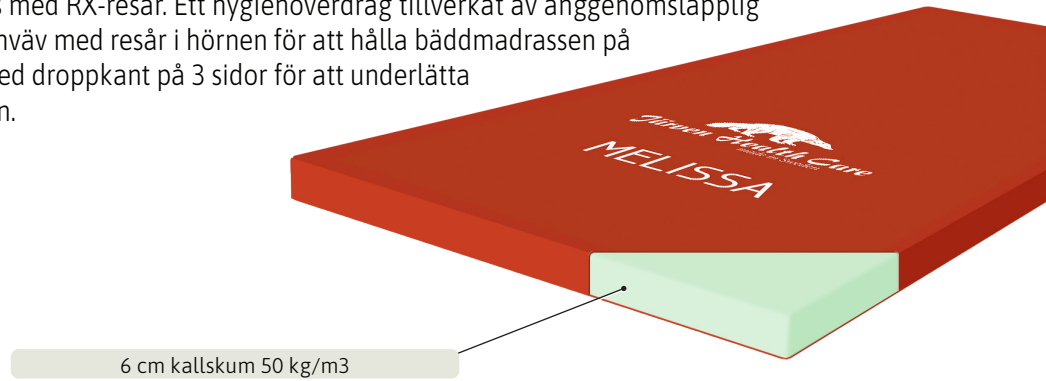

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa 12 bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa 12, bäddmadrass	27	41	44

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	6 cm kallskum 50 kg/m ³
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 2
Madrassvikt	ca 5 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt	Upp till och med 180 kg.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
 www.jarven.se | healthcare@jarven.se