



# MELISSA FLEX

Förebyggande sjukvårdsmadrass med utmärkt tryckutjämning och hög komfort

Melissa Flex är en sjukvårdsmadrass i Melissa-serien. Den är utvecklad för att vara en del i den dagliga vården av patienter. Madrassen är utvecklad för att vara ett hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 2.

- **NOGA SAMMANSATT SKUMKÄRNA.** Melissa Flex är en 2-skiktsmadrass med noga utvalda skumkvaliteter för komfort och god tryckavlasning.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 2.** Melissa Flex är utvecklad som ett hjälpmedel för behandling av patienter med trycksår upp till och med sårkategori 2.
- **TRE VALBARA VÄTSKETÄTA ÖVERDRAG.** Våra prasselfria RX-överdrag är vätsketäta för att förhindra blod och andra kroppsvätskor att tränga in till madrassens skumkärna.
  - RX Basöverdrag
  - RXH Med handtag för förflyttning av madrass
  - RXI Med handtag och evakueringsfunktion



# MELISSA FLEX

UTVECKLAD FÖR HÖG KOMFORT OCH MYCKET GOD TRYCKAVLASTNING.

## Vätsketätt överdrag med goda egenskaper


Melissa Flex levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av 2-stretchig poluretanväv som både är ånggenomsläpplig och prasselfri. Överdraget har dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI) för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Samtliga dragkedjor har droppkant.

## Melissa Flex erbjuder mycket god tryckavlastning

Skumkärnan består av två lager med noga utvalda skumtyper. Tillsammans med vårt RX-överdrag ger detta förutsättningar för en mycket god tryckavlastning. Med ett dokumenterat lågt tryck (46 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror, krävs ingen separat hälzon.

## Melissa Flex erbjuder slutfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt rygggläge i säng.

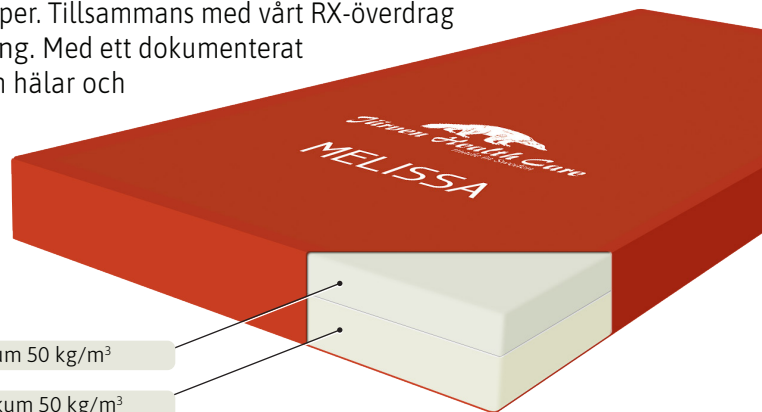

6 cm viskoelastiskt skum 50 kg/m<sup>3</sup>

8 cm höglastiskt kallsaum 50 kg/m<sup>3</sup>

## STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa Flex har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

## Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Flex	30	41	46

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



<b>Material</b>	6 cm viskoelastiskt skum 50 kg/m <sup>3</sup> 8 cm höglastiskt kallsaum 50kg/m <sup>3</sup> ,
<b>Storlekar</b>	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 14 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
<b>Sårkategori</b>	Till och med kategori 2
<b>Madrassvikt</b>	ca 11 kg beroende på längd och bredd

<b>Brukarvikt</b>	Upp till och med 180 kg.
<b>Brand</b>	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
<b>Återvinning</b>	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
<b>Märkning</b>	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se