



MELISSA PARAD - *Bäddmadrass*

En bäddmadrass i hög kvalitet utvecklad för att skapa trygga sjukvårdsmiljöer

Upplev hög komfort och förebygg trycksår med Melissa Parad bäddmadrass. Med en tjocklek på 6 cm och goda tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplementet till din befintliga sjukvårdsmadrass. Med möjligheten att vända och rotera kärnan får du dessutom en långvarig användning med bibehållen kvalitet.

- **HÖGELASTISKT HYPERSOFT-SKUM.** Melissa Parad bäddmadrass har ett höglastiskt hypersoft-skum som har utmärkta tryckavlastande egenskaper.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Tillsammans med en sjukvårdsmadrass är Melissa Parad bäddmadrass utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av patienter med trycksår upp till och med sårkategori 3.
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED RESÅR.** Bäddmadrassen levereras med ett prasselritt RX-överdrag. Överdraget har resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.
- **VÄNDBAR SKUMKÄRNA.** Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa Parad bäddmadrass



MELISSA PARAD - *Bäddmadrass*


ETT UTMÄRKT KOMPLIMENT TILL DIN SJUKVÅRDSMADRASS.

Melissa Parad bäddmadrass är framtagen för att ge tryckavlastning och komfort. Tack vare madrassens tryckavlastande egenskaper ges hela madrassen avlastning åt känsliga kroppsdelar som axlar, hälar och armbågar. Därför krävs ingen separat hälzon.

Det tvåstretchiga hygienöverdraget är även designat för att minska risken för skjuv.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Parad bäddmadrass levereras med RX-resår. Ett överdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig poluretannäv med dragkedja på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Samtliga dragkedjor har droppkant

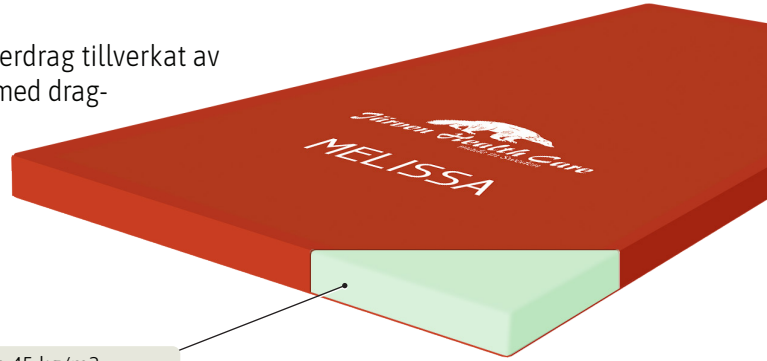

6 cm hypersoft skum 45 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa Parad bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Parad bäddmadrass	24	43	42

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	6 cm hypersoft skum 45 kg/m ³
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 3
Madrassvikt	ca 5 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt	Upp till och med 180 kg.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
 www.jarven.se | healthcare@jarven.se