

SOFT EUROFLEX

Trycksårsförebyggande Hygienmadrass



Unika ytskiktet
Lentex för ökad
komfort

Andas genom
Active membrane
teknik

Utan sömmar
och dragkedjor
för ökad hygien

Förebygger
trycksår upp till
sårkategori 3

LENTEX är vår produktserie med hygienmadrasser och tillhörande produkter med vårt unika Lentex® Technology ytskikt.

BESKRIVNING – SOFT EUROFLEX

Soft Euroflex är en hygienmadrass utvecklad som hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till kategori 3. Madrassen är konstruerad så att hela madrassen har avlastning för utstickande kroppsdelar såsom axlar, hälar och armbågar. Soft Euroflex är uppbyggd av tre olika skumkärnor för god komfort och tryckavlastningsförmåga.

Hygienmadrass

Madrassen som är testad enligt standard SS EN ISO 811 har ett laminerat ytskikt av Lentex® och saknar helt sömmar och dragkedjor vilket ger ökade förutsättningar för en god hygien. Det vita ytskiktet underlättar dessutom för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta som, vid kontaminering, snabbt kan rengöras genom avtorkning och desinficering. Ytskiktet är vätskeavvisande och tätt. Madrassens Active Membrane-teknologi gör att madrassen andas samtidigt som risken att vätska kan tränga in minskar.

Godkänd för säng- och madrasstvätt

Då det blir allt vanligare med automatiserade säng- och madrasstvättar är det viktigt med produkter som klarar av den hanteringen. Våra Lentexmadrasser har testats och godkänts helt utan anmärkning för användning med säng- och madrasstvätt från Sonosteam/Semi Staal.

Hälavlastning


Soft Euroflex har ett dokumenterat lågt tryck (45 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar.

Tryckavlastande funktioner

Skumkärnan består av tre lager med noga utvalda skumtyper för att ge god komfort och bra tryckavlastande förmåga. Tillsammans med vårt unika ytskikt Lentex® kombinerar vi detta med goda hygienegenskaper.

Lentex® Soft Euroflex har testats av Swerea IVF enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

Testresultatet redovisas nedan.

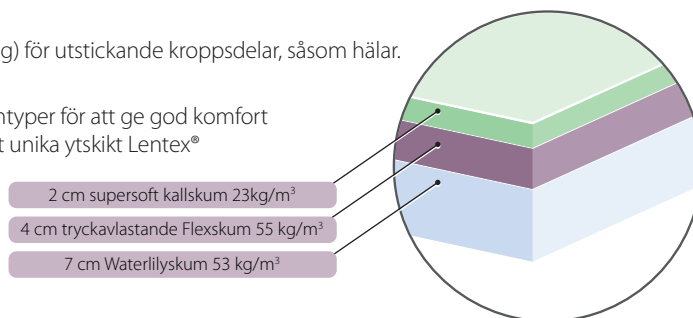

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Soft Euroflex	26	48	45

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har RISE utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmätare på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Material 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³,
4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m³ och
7 cm Waterlilyskum 53 kg/m³.
Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.

Storlekar 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm
(Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Healthcare.)

Sårkategori Till och med kategori 3

Madrassvikt 11-13 kg beroende på längd och bredd (standardstorlekar)

Hygien SS-EN ISO 811.

Brukarvikt 1-180 kg.

Garanti 3 år på utmattning av madrasskärnans
B-värde enligt SS 876 00 11.
5 år på vidhäftningen av Lentex.

Brandstandard SS 87600 01, normalrisk.
Testmetod EN 597-1 & 2

Återvinning Helt återvinningsbar. Sorteras som
brännbart avfall. Demontering krävs ej.

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN,
skötselanvisningar, kontaktinformation,
uppfyllda standarder & placering i säng.



certified for use with Sonosteam/Semi Staal



Järven Healthcare

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se