


# OPTICELL SOFT PRO

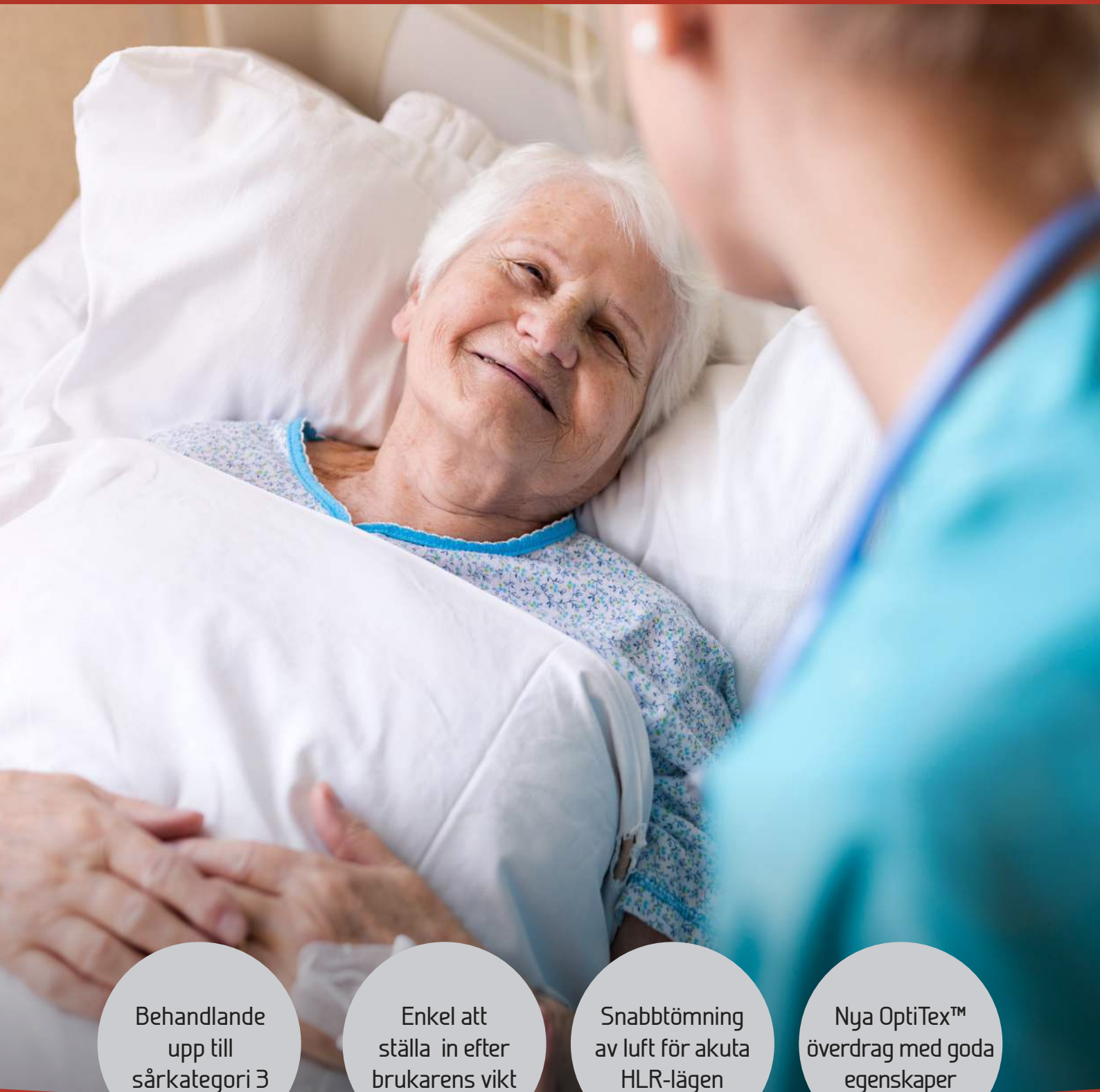

Behandlande  
upp till  
sårkategori 3

Enkel att  
ställa in efter  
brukarens vikt

Snabbtömning  
av luft för akuta  
HLR-lägen

Nya OptiTex™  
överdrag med goda  
egenskaper

*En statisk lufttrycksmadrass med  
hygienöverdrag, smidig pump och utbytbara celler.*

# OPTICELL SOFT PRO

**OptiCell SOFT PRO, är en statisk tryckavlastande luftmadrass** utvecklad som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 3.

OptiCell Soft PRO är av typen ersättningsmadrass med integrerad skumkärna och placeras direkt ovanpå sängbotten. OptiCell Soft PRO levereras med ett slitåligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen.

Den 18 cm tjocka madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss-funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

OptiCell Soft PRO levereras med en energisnål, tystgående pump, OC-15, som är lätt att använda. Att fylla madrassen, som placeras direkt på sängbotten, tar normalt ca 15 minuter att fylla.

## EGENSKAPER – Pump och celler

**INDIVIDUELL ANPASSNING** utefter patientens vikt, 30-250 kg.

**CPR VENTIL** – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

**ALARMFUNKTION** – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

**HÅLAVLASTNING** – Madrassen är utrustad med ett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftlås.

## EGENSKAPER – OPTITEX™ ÖVERDRAG

**INTEGRERAD KABELHÅLLARE** – OptiTex™ överdraget har integrerad, vattentät kabelhållare vilket förhindrar bakteriespridning, håller elsladden ur vägen och skyddar luftslangarna.

**GOD HYGIEN** – OptiTex™ överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95° C. Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70° C) eller med desinfektionsmedel.

**DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS PÅ FYRA SIDOR.** Alla sömmar är svetsade.

**FYRA STYCKEN HANDTAG** för att underlätta förflyttning.

## Produktspecifikationer

**STANDARDSTORLEKAR** 200/210/220x80/85/90/105/120 cm.

För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

**TRYCKSÅRSKATEGORI** 1-3\*

**CELLER** 17 utbytbara celler tillverkade i mjuk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss funktion.

**ÖVERDRAG** OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

**PUMP OC-15.** Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klar att använda. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

**GARANTI** 2 år på fabrikationsfel.

**BRANDSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

**BRUKARVIKT** Upp till 30-250 kg.

**ÅTERVINNING** Se bruksanvisning

**VIKT** Madrass 9 kg (200 x 90 cm), pump 2 kg

**MÄRKNING** tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrassen med celler och slangar är PVC-fri



\* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.  
Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



## OptiTex™ – hygienöverdrag med goda egenskaper



ÖVERDRAGETS  
VATTENTÄLIGHET  
ISO 811-1981



LUFTGENOM-  
SLÄPPLIGHET  
ISO 11092



ÖVERDRAGETS  
BRANDSTANDARD  
BS EN 597-1 & 2



ÖVERDRAGETS  
STRÄCKTÄLIGHET  
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK  
FÖRMÅGA  
ISO 811-1981