



MELISSA BASIC - *Bäddmadrass*

En prisvärd bäddmadrass med tryckavlastande egenskaper

Med Melissa Basic bäddmadrass får du en prisvärd bäddmadrass utvecklad för att minska risken för uppkomst av trycksår, kategori 1. Med en tjocklek på 6 cm och tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplementet till din befintliga sjukvårdsmadrass.

Med möjligheten att vända och rotera kärnan får du dessutom en långvarig användning med bibehållen kvalitet.

- **HÖGELASTISKT KALLSKUM.** Melissa Basic bäddmadrass har ett höglastiskt kallsaum som ger en hållbar och stabil bäddmadrass.
- **VÄNDBAR SKUMKÄRNA.** Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa Basic bäddmadrass
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED ELLER UTAN RESÅR.** Bäddmadrassen levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget kan levereras med resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.




MELISSA BASIC - *Bäddmadrass*

ETT UTMÄRKT KOMPLIMENT TILL DIN SJUKVÅRDSMADRASS.

Melissa Basic bäddmadrass är framtagen för att ge tryckavlastning och komfort och kan även användas som underläggs- och distansmadrass. Det tvåstretchiga hygienöverdraget är även designat för att minska risken för skjuv.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Basic bäddmadrass levereras med RX-överdrag. Ett hygienöverdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig polyuretanväv. Kan även levereras med resår i hörnen (RX-Resår) för att hålla bäddmadrassen på plats. Överdraget har dragkedja med droppkant på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen.

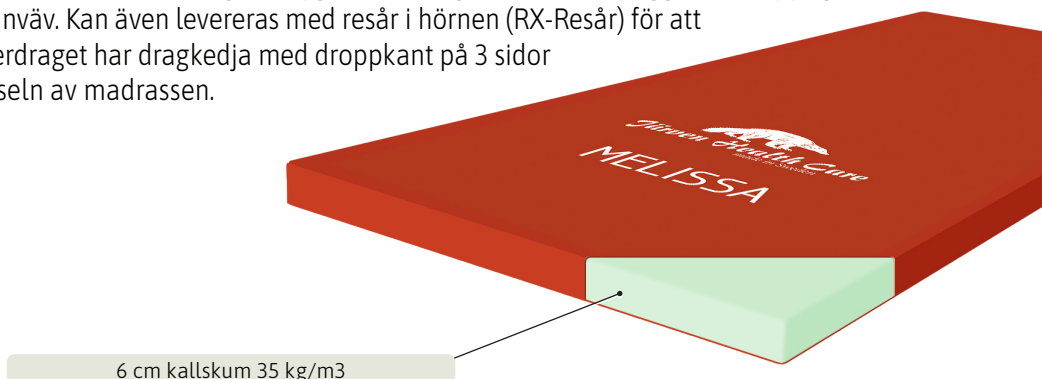

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa Basic bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 1.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Basic, bäddmadrass	34	52	60

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	6 cm kallsaum 35 kg/m ³
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 1
Madrassvikt	ca 4 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt	Upp till och med 180 kg.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.

