



MELISSA FLEX - *Bäddmadrass*

En prisvärd bäddmadrass med tryckavlastande egenskaper

Med Melissa Flex bäddmadrass får du en prisvärd bäddmadrass utvecklad för att minska risken för uppkomst av trycksår, kategori 2. Med en tjocklek på 6 cm och tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplement till din befintliga sjukvårdsmadrass.

Med möjligheten att vända och rotera kärnan får du dessutom en långvarig användning med bibehållen kvalitet.

- **VISKOELASTISKT TRÖGSKUM.** Melissa Flex bäddmadrass har ett viskoelastiskt trögskum med tryckavlastande egenskaper.
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED ELLER UTAN RESÅR.** Bäddmadrassen levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget kan levereras med resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.
- **VÄNDBAR SKUMKÄRNA.** Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa Flex bäddmadrass




MELISSA FLEX - Bäddmadrass

EN HÅLLBAR OCH TRYCKAVLASTANDE BÄDDMADRASS.

Melissa Flex bäddmadrass är framtagen för att ge tryckavlastning och komfort och kan även användas som underläggs- och distansmadrass. Det tvåstretchiga hygienöverdraget är designat för samarbeta med madrassens skumkärna för att ge god tryckavlastning. Överdraget är även utformat för att minska risken för skjuv.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Flex bäddmadrass levereras med RX-överdrag. Ett hygienöverdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig polyuretanväv. Bäddmadrassen kan även levereras med resår i hörnen (RX-Resår) för att hålla bäddmadrassen på plats. Överdraget har dragkedja med droppkant på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen.

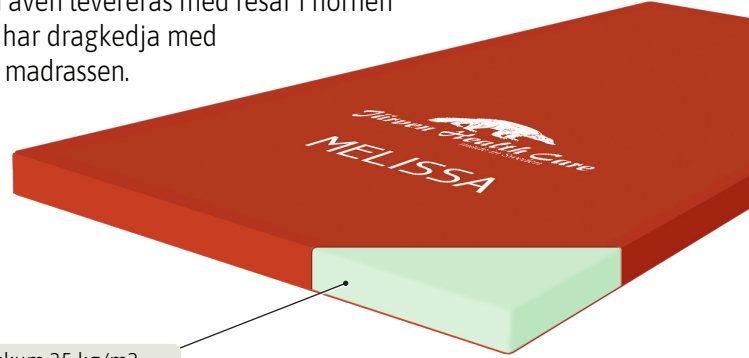

6 cm viskoelastiskt trögsaum 35 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa Flex bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Flex, bäddmadrass	27	47	46

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	6 cm viskoelastiskt trögsaum 35 kg/m ³
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 2
Madrassvikt	ca 4 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt	Upp till och med 180 kg.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.

