

OPTICELL *Air1*



Hybridmadrass med mycket hög komfort och jämn tryckavlastning med TruePressure. OptiCell Air1 är en hybridmadrass utvecklad för att uppfylla vårdens höga krav och tillgodose brukarens behov. Med integrerade luftceller utan skum.

- **KONTROLLERAT MOTTRYCK.** Försedd med tryckfördelningsteknik, kallat **TruePressure**. De sammankopplade luftcellerna fördelar lufttrycket jämnt över madrassen. Detta skapar ett slutet system som ger hög komfort och ett kontrollerat mottryck.
- **HELT LJUDLÖST SYSTEM** då madrassen saknar elektrisk pump.
- **FLEXIBEL TRYCKAVLASTNING.** Den medföljande handpumpen används för att kontrollera, och eventuellt justera, lufttrycket i madrassen. Efter brukarens behov.
- **EVAKUERINGSFUNKTION.** OptiCell Air1 kan levereras med evakueringsöverdrag som är utvecklad för att tillgodose sjukvårdens behov av en säker evakueringslösning. För patienter på hybridmadrasser – särskilt för dem som har svårt att själva fly vid brand eller andra akuta situationer.



Järven Health Care


OptiCell Air1

HYBRIDMADRASS MED JÄMN TRYCKFÖRDELNING TACK VARE TRUEPRESSURE.

Komfort och effektiv tryckavlastning genom Nedsänkning och Omslutning.

Med en höjd på 18-20 cm erbjuder madrassen god komfort och bra tryckavlastning. Tillsammans med det flexibla överdraget OptiTex arbetar skum och luftceller för att erbjuda bästa möjliga Nedsänkning och Omslutning, de två viktigaste biokemiska egenskaperna för att minska risken för trycksår^[1].

OptiCell Air1 är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

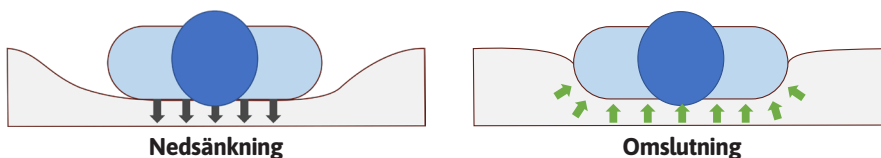

MADRASS MODELL	MADRASS HÖJD	MAX BRUKARVIKT	MATERIAL LUFTCELLER	MADRASS- TYP	TRYCKSÅRS- KATEGORI
Air1 R7	18/20 cm	230/250 kg	Nylon/PU	Hybrid	3
Air1 R8	18/20 cm	230/250 kg	Nylon/PU	Hybrid	3
Air1 Evac	20 cm	250 kg	Nylon/PU	Hybrid	3

Genomtänkt konstruktion

- Stabil placering genom undersida med antiglid-funktion och fyra fästband.
- Underlättar förflyttning av madrass med fyra stycken handtag.
- Droppskyddat vätsketätt blixtlås på alla sidor. Svetsade sömmar.
- Integrerad kabelhållare för minskad risk för bättre hygien, samtidigt som elsladden hålls ur vägen och luftslangarna skyddas.
- Överdraget rengörs med desinfektionsmedel och maskintvättas i 95°C.



[1] Wounds International 2020 | Vol 11 utgåva 4 | Gefen A and Soppi E, sid 39

“De två viktigaste biomekaniska egenskaperna som avgör hur effektivt en stödyta minskar risken för trycksår hos patienter med nedsatt rörlighet eller sensoriska funktioner är nedsänkning och omslutning.

- **Nedsänkning** är det djup som en patients kropp tränger igenom när den placeras på en stödyta.
- **Omslutning** är stödytans förmåga att forma sig runt patientens kropp.”

Produktspecifikationer

Storlekar 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 18/20 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

Material Luftcellerna är tillverkade i nylon/PU
OptiTex-överdraget är tillverkat av en bi-elastisk dubbel-laminerad textil av mjuk och elastisk PU.

Kategori Upp till och med kategori 3.

Vikt Madrass 16,5 kg.

Pump OC11, handpump.

Brand SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

Brukarvikt Upp till 230 kg/250 kg. (beroende på modell)

Garanti 2 år på fabrikationsfel

Återvinning Se bruksanvisning.

Märkning Tillverkningsår, månad, vecka, skötselanvisningar, EAN, uppfylla standarder samt placering i säng.