

OPTICELL SMART



Nästa generations tryckavlastningssystem

OptiCell SMART är en serie luftmadrasser utformade som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår tillsammans med andra förebyggande och terapeutiska åtgärder.

- **TYST OCH LUGN SÖMNUPPLEVELSE.** Tack vare vår tystgående pump, OC55. Pumpen anpassar automatiskt lufttrycket efter brukarens vikt, för ger en trygg och behaglig sömn.
- **ENKEL BORTKOPPLING AV CELLER** med Multi Zone Relief. Möjliggör flexibel behandling och underhåll utan att kompromissa med komfort eller funktion.
- **OSTÖRD SÖMN** med True Alternating. För en mer bekväm och rörelsefri sömnupplevelse.
- **EVAKUERINGSFUNKTION.** OptiCell SMART kan levereras med evakueringsöverdrag för en säker evakueringslösning.



OptiCell SMART

LUFTMADRASSER MED SMARTA OCH GENOMTÄNKTA FUNKTIONER.

OC55 justerar lufttrycket i madrassen helt automatiskt utifrån brukarens kroppsvikt. Detta innebär att trycket hålls inom ett anpassat intervall – utan behov av manuell kalibrering – oavsett om användaren väger 50 eller ända upp till 350 kg (*Bariatric*).


Minskad belastning mot kroppen. Pumpen erbjuder två lägen, *växlande* eller *statiskt*. Trycknivån hålls jämn, oberoende av vilket läge som används.




MADRASS MODELL	MADRASS HÖJD	MAX BRUKARVIKT	MATERIAL LUFTCELLER	BÄDD ENKEL-CELL	MADRASS LUFT & SKUM	MADRASS CELL-ON-CELL	TRYCKSÅRS-KATEGORI
N SERIE	10-20 cm	210-250 kg	Nylon/PU	●	●*	●	3 - 4
T SERIE	13 cm & 18 cm	230 kg	TPU	●	●*		4
EVAC	20 cm	250 kg	TPU		●*		4
R SERIE	16-20 cm	230-250 kg	TPU			●	4
R 10 Bariatric	25 cm	350 kg	TPU			●	4
Air1 SX	18/20 cm	230/250 kg	Nylon/PU		●**		4
Air1 SX EVAC	18/20 cm	230/250 kg	Nylon/PU		●**		4

* Skumbotten på insidan av överdraget

** Hybridmadrass, skummadrass med inbyggda luftceller

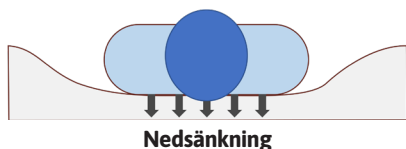

Nedsänkning

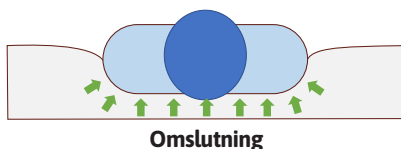

Omslutning

Madrasserna tillsammans med OptiTex-överdrag erbjuder komfort och effektiv tryckavlastning, genom Nedsänkning och Omslutning.



Genomtänkt konstruktion

- Den helautomatiska konstruktionen ger ett lågt mottryck oavsett brukarvikt.
- Överdraget har integrerad kabelhållare för en bättre hygien, samtidigt som luftslangar och elkabel skyddas och hålls på plats.
- Minskad risk att ligga igenom även vid elavbrott med Cell-on-cell teknologi.
- Överdraget har en dropp- och vattentät dragkedja som löper runt alla fyra sidor. Dragkedjan har svetsade sömmar.
- Undersidan har en halkskyddande funktion och fyra fästband.

Överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och maskintvättas i 95°C. Celler och slangar kan enkelt tas bort från överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

Produktspecifikationer

Storlekar 190/200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 10–25 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

Material De utbytbara luftcellerna är tillverkade i nylon/PU eller TPU. Överdraget är tillverkat av en bi-elastisk dubbel-laminerad textil av mjuk och elastisk PU.

Kategori Upp till och med kategori 3–4.

Vikt Madrass (200 x 90 cm) 6–10 kg
Pump 3,4 kg

Pump OC55, en avancerad pump som automatiskt anpassar sig till brukarens vikt. Ljudnivå 21db.

Brand SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

Brukarvikt Upp till 230/250/350 kg. (beroende på modell)

Garanti 2 år på fabrikationsfel

Återvinning Se bruksanvisning.

Märkning Tillverkningsår, månad, vecka, skötselanvisningar, EAN, uppfyllda standarder samt placering i säng.

