

OPTICELL *Soft PRO*



En statiskt kombinationsmadrass med skumbotten och luftceller.

OptiCell Soft PRO, är en 18 cm hög statisk tryckavlastande madrass med en integrerad skumkärna som placeras direkt på sängbotten. Systemet är utvecklat som ett förebyggande och terapeutiskt hjälpmedel vid behandling av trycksår.

- **ENERGISNÅL OCH TYST PUMP.** Den tysta pumpen ger en behaglig och lugn ljudmiljö.
- **ENKELT ATT T SKAPA HELT TRYCKFRIA ZONER**
Luftmadrassens luftceller kan snabbt, enkelt och helt utan verktyg frikopplas (med patient på madrassen) för att helt avlasta exempelvis hälar och sacrum.
- **HÖG KVALITÉ RAKT IGENOM.** Både skum och celler håller hög kvalitet och tillsammans med den genomtänkta och välkonstruerade pumpen är det ett pålitligt system.
- **KONSTANT LÅGT TRYCK OAVSETT BRUKARVIKT**
tack vare den avancerade och samtidigt användarvänliga pumpen.



OptiCell Soft PRO


EN DRIFTSÄKER STATISK LUFTMADRASS FÖR GOD TRYCKAVLASTNING OCH ROFYLLD VILA.

Vi vill skapa trygghet för både patient och personal med vårt driftsäkra madrasssystem - OptiCell Soft PRO. Den användarvänliga pumpen har utvecklats i samarbete med svensk vårdpersonal för att underlätta det dagliga vårdarbetet.


För att helt tryckavlasta utsatta kroppsdelar har madrassen ventiler med luftlås som enkelt kan frikoppla valfri cell. Helt utan verktyg eller invecklade instruktioner.

Komfort och effektiv tryckavlastning genom Nedsänkning och Omslutning.

Med en höjd på 18 cm erbjuder madrassen god komfort och bra tryckavlastning. Tillsammans med det flexibla överdraget OptiTex arbetar luftceller och skum för att erbjuda bästa möjliga Nedsänkning och Omslutning, de två viktigaste biokemiska egenskaperna för att minska risken för trycksår^[1]. OptiCell Soft PRO är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

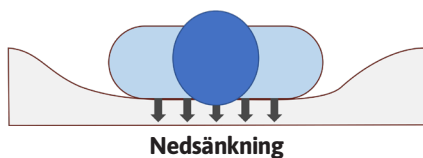

Nedsänkning

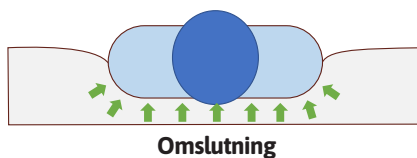

Omslutning



Genomtänkt konstruktion

- Stabil placering genom undersida med antiglid-funktion och fyra fästband.
- Hälvlastning med bortkoppling av enskilda celler (integrerat luftlås)
- Varnar för lågt tryck med alarmfunktion, både ljus- och ljudalarm.
- Underlättar förflyttning av madrass med fyra stycken handtag.
- Droppskyddat vätsketätt blixtlås på alla sidor. Svetsade sömmar.
- Integrerad kabelhållare för minskad risk för bakteriespridning, samtidigt som elsladden hålls ur vägen och luftslangarna skyddas.
- Överdraget rengörs med desinfektionsmedel och maskintvättas i 95°C.
- Celler och slangar kan plockas ur överdraget och rengöras med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

[1] Wounds International 2020 | Vol 11 utgåva 4 | Gefen A and Soppi E, sid 39

“De två viktigaste biomekaniska egenskaperna som avgör hur effektivt en stödyta minskar risken för trycksår hos patienter med nedsatt rörlighet eller sensoriska funktioner är nedsänkning och omslutning.

- **Nedsänkning** är det djup som en patients kropp tränger igenom när den placeras på en stödyta.
- **Omslutning** är stödytans förmåga att forma sig runt patientens kropp.”

Produktspecifikationer



Storlekar 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 18 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

Material Luftcellerna är tillverkade i nylon
OptiTex-överdraget är tillverkat av en bi-elastisk dubbel-laminerad textil av mjuk och elastisk PU.
Madrass, celler och slangset är helt PVC-fria.

Kategori Upp till och med kategori 3.

Vikter Madrass 9 kg (200x90 cm), pump 2,0 kg.

Pump OC31 en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå 21 dB.

Brand SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

Brukarvikt Upp till 250 kg.

Garanti 2 år på fabriktionsfel

Återvinning Se bruksanvisning.

Märkning tillverkningsår, månad, vecka, skötselanvisningar, EAN, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | 891 60 Örnsköldsvik | Sverige
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se