



MELISSA HEAVY

Stabil sjukvårdsmadrass med extra lågt tryck oavsett brukarvikt

Melissa Heavy är en 18 cm tjock sjukvårdsmadrass i Melissa-serien som är godkänd för 250 kg brukarvikt men passar även passar patienter med normalvikt. Madrassen som är stabil och stadig ger extra lågt mottryck och är utvecklad för att minska risken för trycksår upp till och med kategori 3.

Det dokumenterat låga trycket är avlastande för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar.

- **GODKÄND FÖR 300 KG BRUKARVIKT.** Melissa Heavy har en stadig och stabil konstruktion som möjliggör brukarvikter på upp till 250 kg.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Det omsorgsfulla valet av skumkvaliteter ger madrassen ett extra lågt mottryck och används som ett behandlande hjälpmedel till och med sårkategori 3
- **TRE VALBARA VÄTSKETÄTA ÖVERDRAG.** Våra prasselfria RX-överdrag är vätsketäta för att förhindra blod och andra kroppsvätskor att tränga in till madrassens skumkärna.
 - RX-5 Basöverdrag
 - RXH-5 Med handtag för förflyttning av madrass
 - RXI-5 Med handtag och evakueringsfunktion



MELISSA HEAVY

UTVECKLAD FÖR ATT GE GOD TRYCKAVLASTNING ÄVEN FÖR TYNGRE BRUKARE.

Melissa Heavy är en stabil och trygg sjukvårdsmadrass

Skumkärnans sammansättning är omsorgsfullt utformad för att kunna hantera brukarvikter upp till 250 kg. Ett 12 cm högelastiskt skum (50 kg/m³) kombinerat med ett 6 cm viskoelastiskt skum (50 kg/m³) ger en stabil och bekväm sjukvårdsmadrass med mycket goda tryckavlastande egenskaper.

Madrassen är utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av patienter med trycksår upp till kategori 3.


Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Heavy levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig polyuretanväv. Överdraget har dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Samtliga dragkedjor har droppkant.

Melissa Heavy erbjuder slutfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt rygggläge i säng samt vid sängkant.

6 cm viskoelastiskt skum 50 kg/m³
12 cm högelastiskt kallskum 50 kg/m³

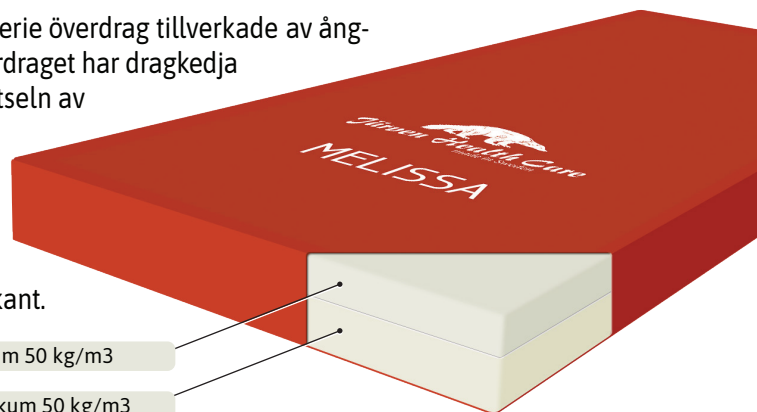

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa Heavy har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Heavy, 18 cm	26	41	43

*RISE (Research Institutes of Sweden), a Swedish independent research institute - www.ri.se

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material 6 cm viskoelastiskt skum 50kg/m³
12 högelastiskt kallskum 50kg/m³,
Storlekar 200/205 x 80/85/90/105/120 x 18 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori Till och med kategori 3
Madrassvikt ca 16 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt Upp till och med 300 kg.
Brand SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning Madrass med överdrag är helt återvinningsbar.
Sorteras som brännbart avfall (demontering krävs ej)
Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN,
skötselanvisningar, kontaktinformation,
uppfylla standarder samt placering i säng.



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se