



# Melissa Heavy

Stabil vårdmadrass med extra lågt tryck, för bariatrisk vård.

**Melissa Heavy är en 18 cm tjock vårdmadrass i Melissa-serien som ger komfort och stabilitet. Madrassen ger extra lågt mottryck och är utvecklad som ett hjälpmedel för att minska risken för trycksår upp till och med kategori 3.**

- **FÖR 300 KG BRUKARVIKT.**  
Skumkärnans sammansättning är omsorgsfullt utformad för den tyngre brukaren med en maximal brukarvikt på 300 kg.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.**  
Madrassen har ett dokumenterat extra lågt mottryck och är utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av patienter med trycksår upp till kategori 3.
- **BRETT VIKTSPANN.**  
Även om madrassen är anpassad till bariatrisk vård, visar oberoende tryckttester att madrassen bibehåller sina tryckavlastande egenskaper även för brukare med lägre vikt.
- **TRYCKAVLASTAR HELA KROPPEN.**  
Madrassens låga mottryck är avlastande även för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar. Detta gör att ingen separat hälzon krävs.



# Melissa Heavy

**STABIL VÅRDMADRASS MED EXTRA LÅGT TRYCK, FÖR BARIATRISK VÅRD.**

## Melissa Heavy erbjuder slutfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion vid höjt ryggläge i säng.


## Valbart överdrag för anpassad funktionalitet

Melissa Heavy levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av ånggenomsläpplig, vattentät och prasselfri 2-stretch polyuretanväv. Samtliga överdrag har droppkant.

| RX-ÖVERDRAG                                  |
|--|
| RX-5 standardöverdrag *                      |
| RXH-5 med handtag för att bära madrass *, ** |
| RXI-5 med inbyggd evakueringsfunktion        |
| RXS-5 med resår (för bäddmadrassen) *        |

\* Kan levereras med svetsade sömmar (-W)

\*\* Kan levereras med svetsade sömmar och vattentålig dragkedja (-WR)

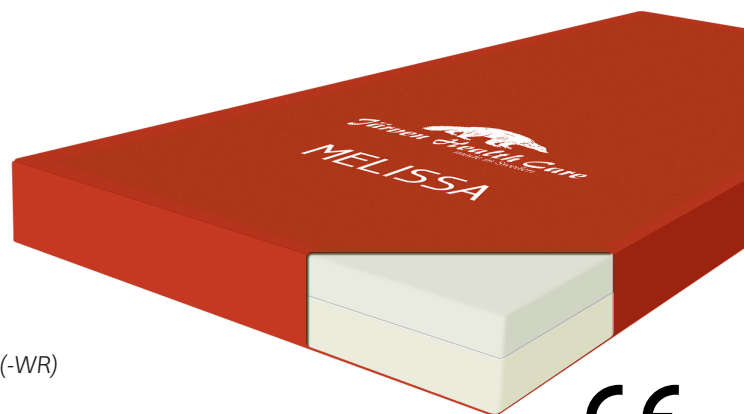

## STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa Heavy har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

### Testresultatet redovisas nedan.

| Belastning               | Extra låg | Låg         | Medel       | Hög         |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Stor intryckskropp 300 N | < 30,0    | 30,0 - 34,9 | 35,0 - 39,9 | 40,0 - 44,9 |
| Stor intryckskropp 600 N | < 45,0    | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |
| Liten intryckskropp 40 N | < 45,0    | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |

| Madrass              | Stor intryckskropp 300 N | Stor intryckskropp 600 N | Liten intryckskropp 40 N |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Melissa Heavy, 18 cm | 26                       | 41                       | 43                       |

\*RISE (Research Institutes of Sweden), a Swedish independent research institute - [www.ri.se](http://www.ri.se)

## Produktspecifikationer

**Material** 6 cm viskoelastiskt skum 50kg/m<sup>3</sup>.  
12 högelastiskt kallskum 50kg/m<sup>3</sup>.

**Storlekar** 200/205 x 80/85/90/105/120 x 18 cm.  
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care)

**Madrassvikt** ca 16 kg beroende på längd och bredd.

**Sårkategori** Till och med kategori 3.

**Brukarvikt** Upp till och med 300 kg.

**Brand** SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2).



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
[www.jarven.se](http://www.jarven.se) | [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)